

A collection of dental handpieces with various colored handles (blue, yellow, orange, green, red, grey) and metal tips, arranged in a fan-like pattern against a light blue background. The handpieces are shown in sharp focus, with some showing bright sparks or light reflections from their tips. The background is a soft, out-of-focus gradient of light blue and white.

LM

feel the
difference

Italiano

LM 112-156 EASI
H-Scaler I



LM-Instruments Oy

LM-Instruments • Scelta di manici

4



Diagnostica

Manici per specchietto • Sonde • Sonde parodontali

11



Parodontologia

Scaler • Curette universali • Curette di finitura Gracey
• Strumenti speciali • LM-ErgoMix con punte intercambiabili

17



Conservativa

Escavatori • Margin trimmer • Spatola • Applicatori per filo retrattore
• Applicatore sottofondo • Otturatori • Strumenti per brunitura
• Strumenti per modellazione • Strumenti per compositi • Carver
• Strumenti per la rimozione del materiale in eccesso • Strumento per la
rimozione di otturazioni • Strumenti per l'inserimento/rimozione di corone
• Portastrisce LM-Cello

33



Endodonzia

Sonde • Escavatori • Otturatori • Chirurgia • File endodontici

45



Estrazione

Leve lussatrici • Leve per estrazione

51



Ortodonzia

Apparecchi mobili • Manico specchietto per ortodonzia • Pressalegatura
• Strumento per piegare l'arco vestibolare

55

Ultrasuoni e profilassi

LM-ProPower • Punta per ultrasuoni

61

Kit di strumenti

71

Prodotti speciali

LM-MultiHolder • LM-CompoKnife • LM-ErgoHold • LM-MultiSector
• Punta con spazzola di applicazione

73

Manutenzione razionale degli strumenti

Manutenzione degli strumenti LM-Servo • Productos de identificación
• Disinfettante per strumenti LM-ProColor
• Affilastrumenti LM-RondoPlus
• Istruzioni per la manutenzione degli strumenti

76

Indice e Condizioni di garanzia

80

Il vostro lavoro merita LM

Come ogni vero professionista, anche noi ci impegniamo per raggiungere l'assoluta perfezione nel nostro lavoro.

LM-Instruments dedica l'intero processo di produzione e sviluppo per ottenere la massima qualità in tutti i prodotti, in modo che voi possiate avere i migliori strumenti di lavoro. Forniamo la qualità più elevata per garantirvi trattamenti di successo.



PLANMECA

LM-Instruments fa parte del Gruppo Planmeca, uno dei più importanti produttori a livello mondiale di attrezzature odontoiatriche. www.planmeca.com

LM-Instruments utilizza la più moderna tecnologia ...



LM

feel the difference



Sia che si tratti della progettazione che della produzione degli strumenti manuali LM, ci concentriamo sulle esigenze specifiche del personale odontoiatrico. Siamo in costante contatto con gli utilizzatori finali dei nostri prodotti per ottimizzare lo sviluppo dei prodotti stessi. Noi siamo gli innovatori leader che gli altri copiano. LM è stata la prima a presentare sul mercato uno strumento in silicone nel 1989.

Fin dalla nascita dell'azienda, l'ergonomia è stata la luce guida dello sviluppo dei prodotti. I nostri capisaldi degli anni Ottanta - un manico più spesso, la forma ottimizzata, la superficie elastica, la leggerezza e la codifica a colori - sono diventati standard industriali nel 21° secolo. L'impugnatura naturale e antiscivolo degli strumenti è stata riconosciuta come comoda ed efficiente in tutto il mondo. Voi potete sentire la differenza, così pure i vostri pazienti maggiormente soddisfatti.




...e la rifinitura manuale della sua produzione per soddisfare le esigenze specifiche del personale odontoiatrico.

Tutti i nostri prodotti sono realizzati in Scandinavia. I nostri prodotti ad elevata tecnologia sono rifiniti a mano per ottenere la massima qualità e la miglior funzionalità. LM-Instruments è il produttore di strumenti manuali in maggior crescita in Europa e il leader assoluto di mercato nei Paesi Nordici.

Superacciaio LM-DuraGradeMAX

Le più recenti innovazioni nei procedimenti metallurgici

Una delle caratteristiche più significative di uno strumento manuale è l'elevata resistenza all'usura della lama in metallo. Lavorare con strumenti affilati e resistenti è comodo ed efficiente. Grazie all'avanzata ricerca tecnica sui materiali, il superacciaio LM-DuraGradeMAX utilizzato negli strumenti manuali rappresenta l'innovazione nell'ambito della metallurgia. Secondo studi di ricerca indipendenti, la resistenza all'usura delle curette LM è significativamente superiore rispetto a quella degli altri strumenti testati - sia che vengano affilate regolarmente sia che non siano affilate del tutto. Il superacciaio LM-DuraGradeMAX ora viene utilizzato anche per tutte le punte LM per ultrasuoni.

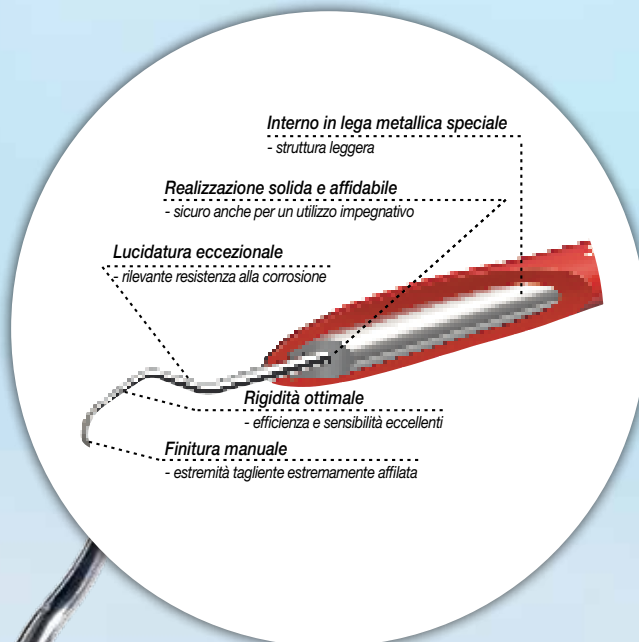

Scegliete la sinergia!

Scegliete sempre i vostri strumenti e metodi operativi secondo la situazione particolare e all'anatomia del dente da trattare. La combinazione di strumenti manuali e tecnologia a ultrasuoni permette procedure più semplici ed efficaci.

LM-Instruments è il primo produttore al mondo a offrire strumenti di elevata qualità sia per la tecnica manuale che meccanica. Una combinazione ottimale garantisce i migliori risultati possibili.

Un pioniere dell'ergonomia

Come definire l'ergonomia di uno strumento manuale? Prima di tutto, è essenziale un'impugnatura naturale e antiscivolo. Seconda cosa, la leggerezza e il design ottimizzato prevengono in modo efficace le malattie professionali. Come terza cosa, una buona sensazione tattile e la facile manipolazione dello strumento garantiscono i migliori risultati clinici. L'affidabilità, la resistenza all'usura e il comfort sono caratteristiche che diventano evidenti sia per l'odontoiatria che per il paziente. Questi sono i principi fondamentali con cui Pekka Kangasniemi, DDS e uno dei fondatori di LM, ha definito l'ergonomia degli strumenti già negli anni Ottanta.

Il design ergonomico rispecchia i risultati delle ricerche più attuali: lo spessore, il design e l'elasticità del manico combinati con una luce LED per illuminare l'area di trattamento.



Novità LM



LM-ServoMax

Flusso di lavoro ottimale e manutenzione razionale

Il nuovo sistema di vassoi LM-ServoMax organizza e razionalizza la gestione degli strumenti dentali e degli accessori durante le procedure e la manutenzione. Consente un buon controllo delle infezioni e permette di risparmiare tempo riducendo la manipolazione dei singoli elementi. Prolunga inoltre la durata degli strumenti e protegge il personale. I suoi moduli versatili permettono di mantenere tutti gli strumenti e gli accessori organizzati in un singolo vassoio. Il sistema può essere adattato alle esigenze specifiche e individuali del trattamento. Maggiori informazioni a pag. 76, 77.

LM-ErgoMix con punte intercambiabili

Una soluzione ecologica per l'affilatura

La serie di strumenti manuali LM-ErgoMix di LM-Instruments offre all'equipe odontoiatrica un'alternativa particolarmente economica, ecologica ed ergonomica. L'affilatura non è più una preoccupazione e le punte mantengono sempre la massima efficacia tagliente. Ogniqualvolta occorra sostituire la punta, basta svitare il lock grip dall'impugnatura, inserire una nuova punta e riavvitare manualmente. Le lega speciale del super acciaio LM-DuraGradeMAX garantisce un'affilatura di lunga durata. Maggiori informazioni a pag. 31, 32.





LM-ProPower

Illuminazione brillante e versatilità

La nuova generazione di dispositivi a ultrasuoni e di profilassi ad aria rappresentano l'eccellenza negli ultrasuoni e la potenza nella profilassi. La particolare ergonomia, insieme all'esclusiva illuminazione a LED, l'elettronica avanzata e le punte di lunga durata LM-DuraGrade MAX rendono i dispositivi LM-ProPower ideali per tutte le procedure che richiedono una precisione elevata.

Grazie ai rivestimenti in silicone intercambiabili LM-ErgoGrip, si dispone di una confortevole impugnatura anti scivolamento. Maggiori informazioni a pag. 62-70.



LM-LiftOut & LM-TwistOut

La famosa ergonomia di LM ora per gli strumenti di estrazione

LM lancia una nuova gamma di strumenti di estrazione con la sua conosciuta ergonomia e sensibilità tattile. Le leve lussatrici LM-LiftOut sono state progettate per estrazioni meno traumatiche e le leve per estrazione LM-TwistOut sono ideali quando è necessaria una maggiore forza e torsione. L'equilibrato design ergonomico rende questi strumenti maneggevoli e facili da gestire. La superficie sicura di LM-ErgoTouch consente una presa leggera e antiscivolo. Gli strumenti sono leggeri e sono più facili da maneggiare. Il super acciaio LM-DuraGradeMAX garantisce lame robuste e affilate. L'ermeticità tra l'impugnatura ed il metallo, ottenuta grazie ad una sofisticata tecnica, garantisce la tenuta, la solidità e l'igiene degli strumenti. Maggiori informazioni a pag. 52-54.





Ampia scelta di manici

Tutti gli strumenti LM sono dotati di impugnatura ErgoNorm o ErgoMax. Il manico LM-ErgoNorm più sottile funziona meglio negli interventi di piccola chirurgia. L'adattamento della mano ha un ruolo importante nella scelta del tipo di manico. Intercambiando i manici ErgoNorm e ErgoMax la mano dell'utilizzatore risulta ancor meno affaticata.

Il nome e il numero dello strumento sono impressi sull'impugnatura. Sono impresse altre codi-fiche come, per esempio, le linee che indicano le dimensioni della lama, l'angolo di inclinazione o la scala di misurazione.

LM-ErgoNorm



LM-ErgoMax



LM-ErgoSingle



Manico per specchietto ben bilanciato per un miglior accesso.

LM-ErgoAccess



Pat. Pend.

Il nuovo manico curvo LM-ErgoAccess assicura l'accesso nelle aree più difficili da raggiungere. Disponibile per strumenti specifici. Vedi pagina 25.

LM-ErgoMix

nuovo



Pat. Pend.

La nuova impugnatura LM-ErgoMix per punte intercambiabili offre tutti i vantaggi economici ed ecologici della sostituzione della punta. Disponibile per strumenti specifici, vedi pagina 31-32.

Al momento dell'ordine, ricordarsi di indicare il codice del tipo di manico:

Si = manico ErgoNorm
(Ø 8.5 mm)

XSi = manico ErgoMax
(Ø 11.5 mm)

EM = manico ErgoMix
(Ø 12.5 mm)

ESi = manico ErgoSingle
(Ø 11.5 mm)

EASi = manico ErgoAccess
(Ø 11.5 mm curvo)

Diagnostica

- Manici per specchietto
- Sonde
- Sonde parodontali



Difficile scegliere?
Raccomandiamo
LM-DiagnoSet!
Vedere pagina 71.

Manici per specchietto

Manici per specchietto

Le filettature dell'impugnatura per specchietto rispondono allo standard internazionale M 2.5 - Il gambo dello specchietto, da fissare all'impugnatura, deve avere un diametro di 2,5 - 2,6 mm.
La filettatura del manico per specchietti LM 28 è in accordo con lo standard internazionale UNF4-48 - il gambo dello specchietto deve avere un diametro di 2,5-2,6 mm.

Manico per specchietto LM 25 ESi / LM 28 ESi

- ben bilanciato, miglior accessibilità
- colori disponibili: rosso, grigio, blu



Manici specchietto LM 25

- colori disponibili: rosso, grigio, blu



Manici specchietto LM 28 XSi

- disponibile solo con manico LM-ErgoMax
- forma conica
- UNF4-48, con filettatura speciale



Manico specchietto, per ortodonzia LM 25-26 XSi

- disponibile solo con manico LM-ErgoMax
- per la misurazione dell'overjet sagittale e dell'overbite verticale
- scala millimetrata, lunghezza totale 25 mm



Impugnatura specchietto JM LM 25-473XSi

- disponibile solo con l'impugnatura LM-ErgoMax (XSi)
- per l'installazione degli abutment sugli impianti



nuovo

Sonde

Per la diagnosi di calcoli e carie e il sondaggio di tasche, restauri e biforcazioni.

Molti explorer e sonde parodontali sono disponibili anche in versione singola.

Sonda LM 5-8



Sonda
LM 5-9



Sonda, centrato
LM 9-17C



Gambo inferiore allungato e lama "back-action". Ideale per il sondaggio delle superfici distali dei denti posteriori. Testa 17C con punta centrata



Sonda
LM 17-23



Sonda, centrato
LM 17C-23



Ideale per il sondaggio delle superfici distali



Sonda
LM 3-6



Sonda
LM 11-12

- angolatura simile a Gra 11/12




Per l'esame delle superfici sottogengivali



Sonde – Sonde parodontali

Sonda per protesi LM 18-19

- per l'esame di corone, ponti, inlay e onla
- elevata sensibilità alle giunture

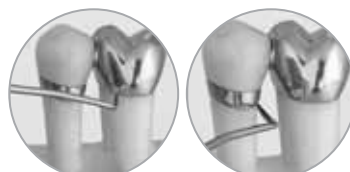

Sonda Holst LM 29

- angolo laterale sul gambo




Sonda LM 9



Sonde – Sonde parodontali

Strumenti combinati per il sondaggio di carie e parodonto

Molti explorer e sonde parodontali sono disponibili anche in versione singola..

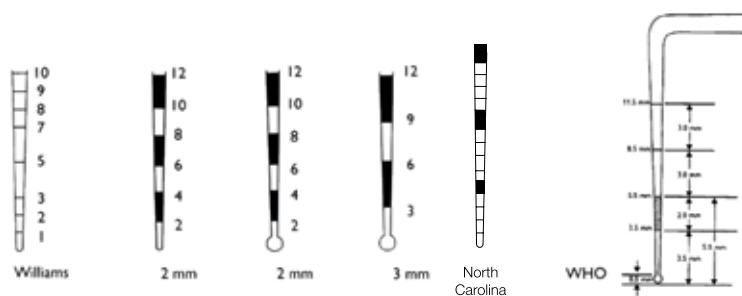


Sonda – Sonda parodontale LM 23-52B



Sonde – Sonde parodontali


**Sonda - Sonda parodontale
LM 8-520B**

- con estremità arrotondata 0,5 mm

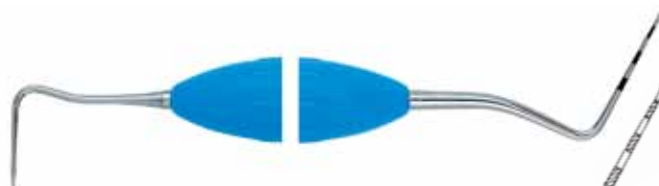


**Sonda - Sonda parodontale
LM 23-520B**

- con estremità arrotondata 0,5 mm

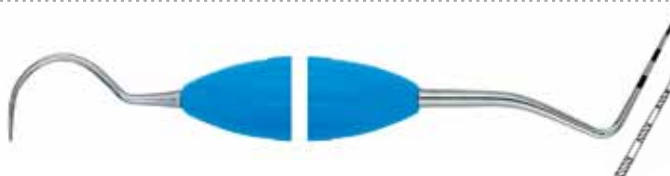

**Sonda - Sonda parodontale
LM 23-530B**

- con estremità arrotondata 0,5 mm

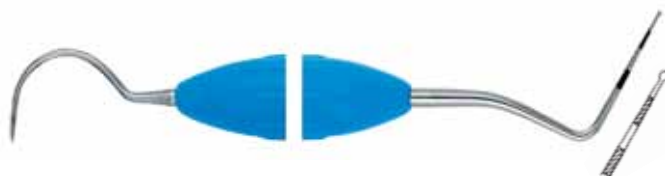


**Sonda parodontale Williams
LM 51**



**Sonda – Sonda parodontale WHO
LM 8-550B**

- con estremità arrotondata 0,5 mm

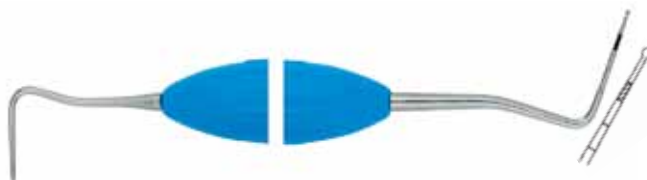

**Sonda – Sonda parodontale WHO
LM 23-550B**

- con estremità arrotondata 0,5 mm



**Sonda parodontale WHO
LM 550B**

- con estremità arrotondata 0,5 mm



nuovo

**Sonda parodontale North Carolina
LM 54B**

- disponibile solo con l'impugnatura
LM-ErgoMax (XSi)




Sonde per biforcazioni

Sonde per biforcazioni

Per sondare l'estensione e la profondità delle biforcazioni.



Per l'esame delle biforcazioni da diverse angolazioni, nel mascellare superiore e inferiore.

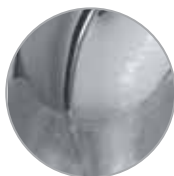

Sonda Nabers
LM 20-21



Sonda per biforcazioni
LM 20B-210B

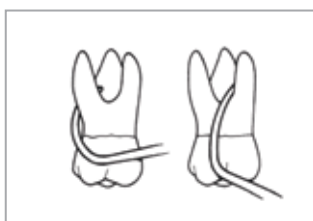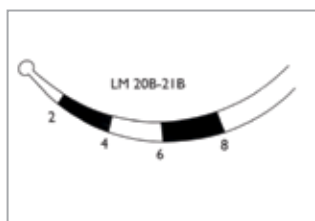

- Per l'esame delle biforcazioni da diverse angolazioni, nel mascellare superiore e inferiore

Parodontologia

- Scaler
- Curette universali
- Curette di finitura Gracey
- Strumenti speciali
- LM-ErgoMix con punte intercambiabili



Difficile scegliere?
Raccomandiamo
LM-PerioSet 1 & 2.
Vedere pagina 71.

Scaler

Scaler

Per la rimozione dei depositi sopragengivali.

Design:
 Sezione triangolare
 Superficie di lavoro perpendicolare rispetto
 al gambo inferiore
 Due lati taglienti (linea rossa)
 Punta affilata



Microscaler LM 301-302



■ *Estremità di lavoro delicata. Soprattutto
per spazi interdentali stretti.*



Scaler LM204S LM 303-304

- gambo particolarmente curvato e punta di lavoro estremamente sottile
- supporta in modo efficace l'azione dei Microscaler



Miniscaler LM 311-312



■ *Tutte le superfici dentali, soprattutto
quelle interprossimali.*



Scaler LM23 LM 313-314

- rispetto al Miniscaler la lama è più corta e il gambo inferiore più lungo



Scaler LM204S

Microscaler



Miniscaler

Scaler LM23

**Crane-Kaplan
LM 322-323**

- particolarmente robusto, rigido, lama ricurve ad angolo acuto
- per la rimozione di placca sopragengivale abbondante

**Mini Kaplan
LM 333-334**

- stessa forma, ma con superficie di lavoro più sottile rispetto al Crane-Kaplan

**McCall 11A-12A
LM 324-325****Scaler per igienista****Scaler a falchetto
LM 141****Scaler U15 Towner
LM 150****Push Scaler H4-H5
LM 144-145**

- superficie di lavoro a 90°
- usare l'estremità a scalpello con pressione dello strumento
- usare l'estremità a falchetto con un movimento di trazione

**Scaler H6-H7
LM 146-147****nuovo****Laplander
LM 148-149**

- facile accesso nell'area dei molari e nelle superfici prossimali.
- simile a H6-H7 ma con curvatura laterale
- disponibile solo con manico LM-ErgoMax XSi



Curette universali

Curette universali

Per la rimozione dei calcoli sopra- e sottogengivali.

Struttura:

La superficie di lavoro è perpendicolare rispetto al gambo inferiore
Due lati taglienti (linea rossa)
Punta arrotondata



McCall 13S-14S
LM 222-223



*Lama robusta con gambo rigido.
Soprattutto per incisivi e premolari.*



Mini McCall 13S-14S
LM 222-223M




Modello mini: più affilato, punta leggermente arrotondata (non a forma di falcetto), indicato per tasche profonde.



Standard

Mini

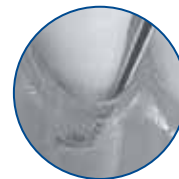

Curette LM 15-16
LM 225-226



McCall 17-18
LM 277-278



Curette universali

McCall 17S-18S
LM 279-280

17-18

- superficie di lavoro robusta e uniforme
- tutte le superfici dentali
- particolarmente indicato per le ampie superfici dei molari



17-18 17S-18S

17S-18S

- lama più sottile, superficie di lavoro più stretta rispetto al modello 17-18
- particolarmente indicato per gli interspazi stretti

La superficie di lavoro delle curette universali è combinata con il gambo angolato delle curette Gracey - per tutte le superfici dentali.

Langer 1/2
LM 281-282

- per premolari inferiori

Langer 3/4
LM 283-284

- per molari superiori

Langer 5/6
LM 285-286

- per incisivi e premolari superiori e inferiori



Le Mini Langer hanno gambi più lunghi ed estremità lavoranti più corte rispetto alle Langer standard.

Mini Langer 1/2
LM 281-282M

- per premolari inferiori



Curette universali

Mini Langer 3/4
LM 283-284M

- per molari superiori



Mini Langer 5/6
LM 285-286M

- per incisivi e premolari superiori ed inferiori



Goldman-Fox 3
LM 233-234



Goldman-Fox 4
LM 235-236



Columbia 2L-2R
LM 217-218



Columbia 4L-4R
LM 219-220



Columbia 13-14
LM 237-238



LM-Syntette

Curette combinata universale e di finitura.

Per la rimozione dei calcoli sopra- e sottogengivali.

Per le superfici concave e convesse.

Con un solo strumento è possibile trattare le superfici mesiali e distali dello stesso spazio interdentale.

Ideale per la tecnica verticale e orizzontale.

Design:

Due lame a forma di ellisse

Punta arrotondata



LM-Syntette
LM 215-216



LM-Syntette, mini
LM 215-216M

- il modello mini è particolarmente indicato per le tasche profonde e strette



Scaler hoe

Per la rimozione dei calcoli sopra- e sottogengivali.

Adatto per tasche strette e profonde e superfici radicolari concave.

Per tecnica verticale e orizzontale.

Design:

Lama fine a forma di uncino con angoli arrotondati

Lama ellittica



Scaler Hoe anteriore
LM 112-113



Scaler Hoe laterale
LM 134-135



Scaler Hoe posteriore
LM 156-157



Curette interprossimali

- superficie di lavoro inclinata, un lato di taglio
- con un'estremità è possibile trattare la superficie mesiale dello spazio interdentale, con l'altra quella distale
- tecnica orizzontale, dal lato buccale



Curette interprossimale SV 1-3 LM 251-253

- 1° e 3° quadrante



Curette interprossimale SV 2-4 LM 252-254

- 2° e 4° quadrante



Lime per biforcazioni


Lima per concavità File SV 5-6 LM 255-256D

- punta arrotondata sottile al diamante
- per la pulizia e la modellazione delle superfici radicolari profonde concave
- lesioni delle biforcazioni acute



Lima per biforcazione File SV 7-8 LM 257-258D

- punta arrotondata sottile al diamante
- per la pulizia di lesioni delle biforcazioni

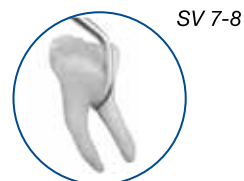

Furcator

Furcator KS LM 259-260 XSi

- disponibile solo con manico LM-ErgoMax XSi




Per la pulizia della base delle biforcazioni e delle superfici interne, soprattutto concavità e scanalature.



Strumenti LM-ErgoAccess

La soluzione per la rimozione del tartaro nelle aree di difficile accesso.

H-Scaler I
LM 112-156 EASi

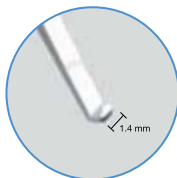


Pat. Pend.

Il manico curvo facilita l'accesso alle aree difficili da raggiungere, come le superficie distali dei molari e degli incisivi inclinati lingualmente.



H-Scaler II
LM 156-157 EASi

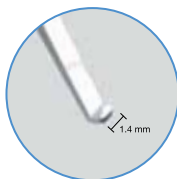

Pat. Pend.

Assicura un facile accesso all'area molare anche in caso di apertura orale limitata



nuovo

Microscaler EASi
LM 301-302 EASi



Pat. Pend.

Si inserisce bene nella superficie prossimale della parte anteriore.



Curette di Gracey per finitura

Curette di Gracey per finitura

Per la rimozione in profondità del tartaro sottogengivale.


Per la finitura delle superfici radicolari sottogengivali.

Design:

Superficie di lavoro inclinata di 20° rispetto al gambo inferiore

Un lato tagliente concavo (linea rossa)

Punta tagliente arrotondata

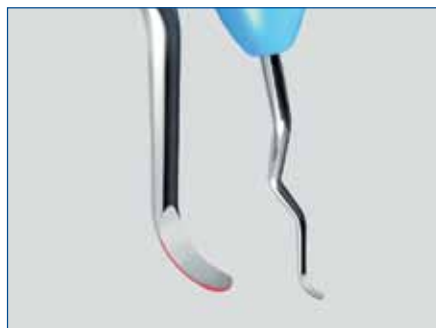**Mini Gracey**


- rispetto al modello standard dispone di un gambo inferiore più lungo e di una superficie di lavoro più piccola

Macro Gracey



- la punta di lavoro lunga del modello standard viene unita al gambo inferiore allungato del modello mini

Rigid Gracey

- il gambo della lama è più robusto e rigido, mentre la superficie di lavoro è leggermente più larga

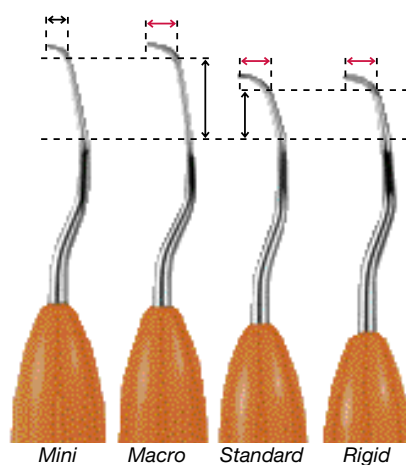

Codifica di Gracey

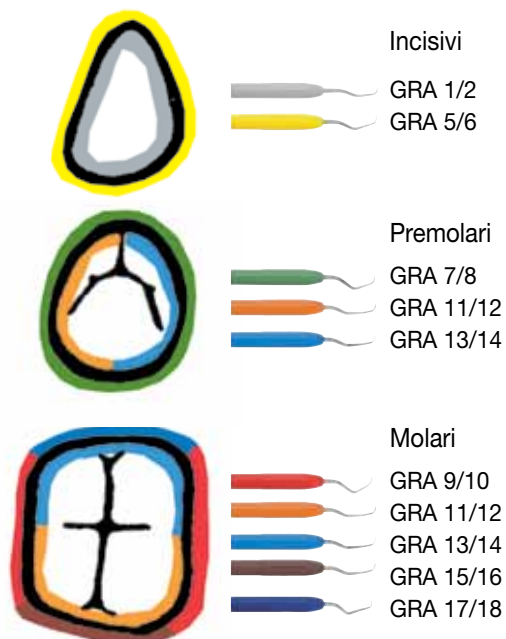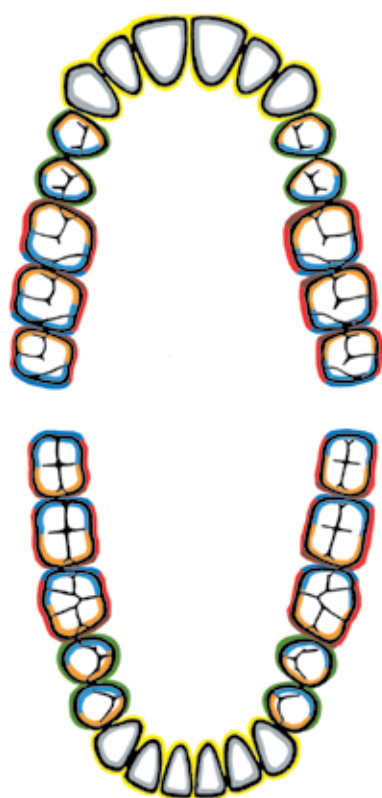

Curette di Gracey per finitura

**Gracey 1/2
LM 201-202**

- incisivi, premolari



Gra 1/2

**Gracey 3/4
LM 203-204**

- incisivi, premolari



Gra 3/4

**Gracey P3-P4
LM 266-267**

- il gambo più corto dona maggior rigidità allo strumento

**Gracey 5/6
LM 205-206**

- incisivi, premolari



Gra 5/6

**Gracey 7/8
LM 207-208**

- premolari, molari



Gra 7/8

**Gracey 9/10
LM 209-210**

- molari



Gra 9/10

**Gracey 11/12
LM 211-212**

- superfici mesiali dei molari



Curette di Gracey per finitura

Gracey 13/14
LM 213-214

- superfici distali dei molari

**Gracey 15/16**
LM 245-246


- superfici mesiali dei molari

**Gracey 17/18**
LM 247-248

- superfici distali dei molari



Dato che il gambo della lama è particolarmente angolato, durante l'utilizzo l'impugnatura dello strumento si trova in una posizione più orizzontale, il che facilita l'esecuzione degli interventi, soprattutto se la bocca del paziente è piccola.

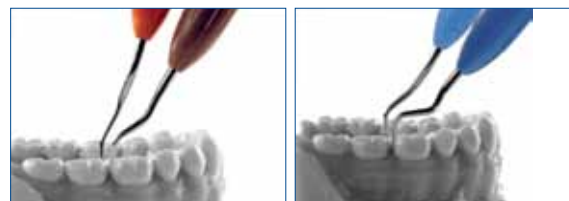

GRA 11/12 GRA 15/16 GRA 13/14 GRA 17/18

Macro curette di Gracey**Macro Gracey 5/6**
LM 205-206AF**Macro Gracey 7/8**
LM 207-208AF**Macro Gracey 11/12**
LM 211-212AF**Macro Gracey 13/14**
LM 213-214AF

Curette di Gracey mesio-distale macro

Vedere anche pag. 30

Macro Gracey 11/14
LM 211-214AF



Macro Gracey 12/13
LM 212-213AF



Mini curette di Gracey

Mini Gracey 1/2
LM 201-202M



Mini Gracey 7/8
LM 207-208M



Mini Gracey 11/12
LM 211-212M



Mini Gracey 13/14
LM 213-214M



Mini Gracey 15/16
LM 245-246M



Mini Gracey 17/18
LM 247-248M



Curette di Gracey per finitura

Curette di Gracey rigid

Le seguenti curette di Gracey sono disponibili anche in versione rigida
 Gracey 1/2
 Gracey 7/8
 Gracey 11/12
 Gracey 13/14
 Gracey 15/16
 (Codice: LM 201-202R Si / XSi ecc.)



Curette di Gracey mesio-distale

Tutti i modelli mesio-distale sono disponibili anche come modelli mini.

Gracey 11/14 e Gracey 12/13 disponibili anche in versione macro (vedere pag. 22)

Per il trattamento di un quadrante alla volta.

Gracey 11/14
 LM 211-214



Gracey 12/13
 LM 212-213



Gracey 15/18
 LM 245-248



Gracey 16/17
 LM 246-247



LM-ErgoMix con punte intercambiabili

nuovo

La nuova serie di strumenti manuali LM-ErgoMix offre un'alternativa economica, ecologica ed ergonomica. L'affilatura non è un pensiero e le punte mantengono sempre la massima efficacia. Ogni volta che si avverte la necessità di sostituire la punta, basta aprire l'impugnatura di blocco, inserire una nuova punta e richiudere. Non sono necessari attrezzi aggiuntivi!

Utilizzare gli strumenti LM-ErgoMix in modo normale, pulire e sterilizzare come qualsiasi altro strumento. La tenuta della giuntura impugnatura/acciaio garantisce un alto livello di igiene.

Vantaggi della sostituzione delle punte

- strumenti sempre affilati
- risparmio di tempo per l'affilatura
- riduce gli sprechi
- consente combinazioni personalizzate di punta



Pat. Pend.

LM-ErgoMix con punte in super acciaio LM-DuraGradeMax

Micro Sickle
LM 301-302 EM



Mini Syntette
LM 215-216M EM



Mini Gracey 1/2
LM 201-202M EM



Mini Gracey 11/12
LM 211-212M EM



Mini Gracey 13/14
LM 213-214M EM



Strumenti con punte intercambiabili

LM-ErgoMix con punte in titanio per impianti

nuovo

Una nuova ed efficace gamma di strumenti per la manutenzione degli impianti. La struttura LMErgoMix garantisce un'eccellente sensibilità tattile e la rigidità ottimale.

Le punte sono realizzate in titanio sensibile ma efficace, per non danneggiare l'abutment.



Implant Mini Universal curette
LM 283-284MTi EM



Implant Mini Gracey 1/2
LM 201-202MTi EM



Implant Mini Gracey 11/12
LM 211-212MTi EM



Implant Mini Gracey 13/14
LM 213-214MTi EM



Parti di ricambio

Manici di ricambio	
Manico ErgoMix - grigio	LM 9010 EM
Manico ErgoMix - grigio scuro	LM 9011 EM
Impugnatura di blocco di ricambio, 2 pz.	
Arancione	LM 9020 EM
Celeste	LM 9021 EM
Grigio	LM 9022 EM
Giallo	LM 9023 EM
Grigio scuro	LM 9024 EM
Rosso	LM 9025 EM

Punte di ricambio, LM-DuraGradeMAX	
Micro Sickle L	LM 301 EM
Micro Sickle R	LM 302 EM
Mini Syntette L	LM 215M EM
Mini Syntette R	LM 216M EM
Mini Gracey 1	LM 201M EM
Mini Gracey 2	LM 202M EM
Mini Gracey 11	LM 211M EM
Mini Gracey 12	LM 212M EM
Mini Gracey 13	LM 213M EM
Mini Gracey 14	LM 214M EM

Punte di ricambio in titanio	
Implant Universal Curette L	LM 283MTi EM
Implant Universal Curette R	LM 284MTi EM
Implant Mini Gracey 1	LM 201MTi EM
Implant Mini Gracey 2	LM 202MTi EM
Implant Mini Gracey 11	LM 211MTi EM
Implant Mini Gracey 12	LM 212MTi EM
Implant Mini Gracey 13	LM 213MTi EM
Implant Mini Gracey 14	LM 214MTi EM

Conservativa

- Escavatori
- Margin trimmer
- Spatola
- Applicatori per filo retrattore
- Applicatore sottofondo
- Otturatori
- Strumenti per brunitura
- Strumenti per modellazione
- Strumenti per compositi
- Carver
- Strumenti per la rimozione del materiale in eccesso
- Strumento per la rimozione di otturazioni
- Strumenti per l'inserimento/rimozione delle corone
- Portastrisce LM-Cello



Difficile scegliere?
Raccomandiamo
LM-CompoSet &
LM-EstheticSet!
Vedere pagina 71.

Escavatore

Escavatori a cucchiaio

Per la rimozione di dentina cariata ammorbidita e otturazioni provvisorie.

Design:

Punta di lavoro a forma di cucchiaio

Punta arrotonda

Lungo lato tagliente, per il trattamento di aree ampie



Escavatore a cucchiaio, 1.0 mm
LM 522-523



Escavatore a cucchiaio, 1.5 mm
LM 533-534



Escavatori Rotondi

Conservativa

- rimozione di dentina cariata ammorbidita
- rimozione di otturazioni provvisorie

Chirurgia

- taglio dei legamenti parodontali prima dell'estrazione
- rimozione dei tessuti granulari dopo l'estrazione

Struttura:

Superficie di lavoro rotonda

Lama curva



Escavatore, rotondo, 1.0 mm
LM 61-62



Escavatore, rotondo, 1.5 mm
LM 63-64



Escavatore, rotondo, 2.0 mm
LM 65-66



Escavatori Triple-Angled

Conservativa

- estremamente efficace per la rimozione della dentina cariata ammorbidita
- escavazione al di sotto dello smalto in preparazioni minimamente invasive

Parodontologia

- rimozione della placca da superfici difficilmente accessibili, come quelle linguali
- pulizia delle superfici concave, come cavità delle radici e delle biforcazioni

Chirurgia

- rimozione del tessuto granulare, per esempio durante la resezione, l'intervento del lembo o l'estrazione

Design:

Estremità lavorante rotonda e lato tagliente curvo.

Angolazioni del gambo per facilitare i trattamenti su superfici buccali, distali e linguali difficili da raggiungere.

Il gambo della lama ha una tripla angolazione, permettendo le funzioni di "back action"



Escavatore triple-angled
rotondo, 1.0 mm
LM 611-621



Escavatore triple-angled
rotondo, 1.5 mm
LM 631-641



Escavatore triple-angled
rotondo, 2.0 mm
LM 651-661



Escavatore triple-angled
rotondo, 3.5 mm
LM 671-681



Margin Trimmer

Per il livellamento orizzontale dei margini della cavità.



Margin trimmer
1.2 mm, distale
LM 121-122



Margin trimmer
1.2 mm, mesiale
LM 125-126



Spatola

Spatola
LM 450-460



Applicatori per filo retrattore


Applicatore per
filo retrattore, 2.0 mm
LM 490-491



Applicatore per
filo retrattore, 2.6 mm
LM 492-493



La particolare angolazione della punta facilita la lavorazione intorno al dente e permette di posizionare il filo anche attraverso movimenti perpendicolari.

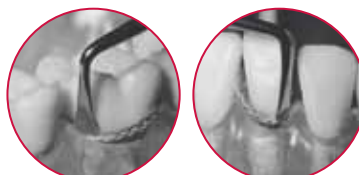

Applicatore Sottofondo

Per applicare il sottofondo o un sottile strato di liner sulla superficie dentinale.

Applicatore di sottofondo, rigido
LM 29H-30H



Applicatore di sottofondo, pieghevole –
Condensatore
LM 30-34

- la punta 30 può essere piegata a piacere in modo da
facilitare l'accesso alle zone più difficili da raggiungere



Applicatore di sottofondo
– Otturatore, rigido
LM 30H-34



Otturatori

Micro Otturatore 0.8 mm
LM 330-331



Otturatore, cilindrico, 0.8 - 1.2 mm
LM 330-350



Otturatore, cilindrico, 1.0 - 1.5 mm
LM 340-360



Otturatori, Brunitura

Otturatore, cilindrico, 1.2 - 2.0 mm
LM 350-380



Otturatore, cilindrico, 1.8-2.5 mm
LM 370-390



Otturatore, triple-angled,
1.2 - 2.0 mm
LM 351-381



Brunitura

Brunitore
LM 31-32



Brunitore
– Otturatore rotondo, 1.5 - 2.5 mm
LM 471-473



Brunitore 27-29
LM 476-477



Brunitore 21
LM 372-373



Markley 2
LM 354-355



Strumenti per restauri estetici

Strumenti versatili per la preparazione di cavità, formati da un trimmer e un escavatore. Due diverse misure per gli strumenti mesiali e distali. La misura più piccola è per le micro preparazioni e quella più grande può essere usata per tutte le altre cavità.

Disponibili solo con manico LM-ErgoMax (XSi).

Trimmex Mesial 1 1.0 mm
LM 6122-6222 XSi



Trimmex Mesial 2 1.5 mm
LM 6322-6422 XSi



Trimmex Distal 1 1.0 mm
LM 6121-6221 XSi



Trimmex Distal 2 1.5 mm
LM 6321-6421 XSi



CMF Shaper
LM 44-45 XSi



Carrier



Modellatore



Finisher



Uno strumento a forma di tomahawk che combina le caratteristiche di un carrier, di un modellatore e di uno strumento per rifinitura.

Grazie all'angolazione a 45 gradi di manico e lama, il composito può essere facilmente posizionato nelle cavità distali e mesiali.

Lo strumento rimuove facilmente gli eccessi da tutte le superficie del dente dopo la polimerizzazione, soprattutto dalle superfici interprossimali dei restauri di II classe.

Per compositi

Modellatore – Porta pennello LM 481-758 XSi

- un classico modellatore PK Thomas 3 combinato con un porta pennello per l'applicazione di punte e pennellini monouso



PK Thomas 3 ha una punta conica, lunga.

Può essere usato per adattare il composito ai margini della cavità e modellare le cuspidi e le fessure per ottenere una superficie occlusale naturale e funzionale



BrushHolder è un'alternativa affidabile e sicura ai supporti realizzati in plastica.

Le punte di applicazione con codice colore vengono utilizzate per applicare liquidi di trattamento su tutte le superficie del dente o in cavità.



Vedere pagina 75 per ulteriori informazioni sulle Punte di applicazione.

Per compositi

Strumento Flow IO LM 484-485 XSi

- per una facile manipolazione e modellazione compositi flow
- disponibile solo con manico LM-ErgoMax (XSi)




Strumenti di modellatura LM 478-479



Otturatore-Modellatore IO LM 482-483

- estremità lavoranti coniche, particolarmente adatte alla modellazione delle superficie occlusali e per la condensazione di tutti i tipi di materiali plastici
- i compositi non aderiscono alle lame appositamente lucidate

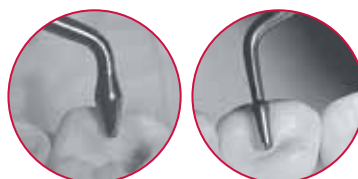

Otturatore-Modellatore IO p LM 482-702

- strumento combinato per i premolari



Otturatore-Modellatore IO p LM 482-702

- strumento combinato per i premolari



Strumento per gli anteriori
LM 43-47



Strumento per i posteriori
LM 48-702



Otturatore modellante, 1.5-2.5 mm
LM 702-703



Spatola per compositi
LM 446-447



Minispatola
LM 444-445



Carver

1/2 Hollenback
LM 741-751



Nyström I
LM 74-75

Nuovo color




Nyström III
LM 76-77

Nuovo colore



Carver, Strumenti per la rimozione del materiale in eccesso, Strumento di rimozione delle otturazioni

Maehlum
LM 71-73

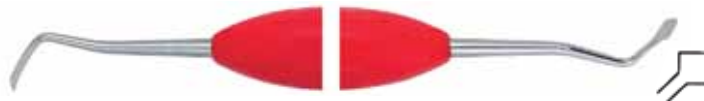

Carver universale, occlusale-prossimale
LM 71-72



Cleioide-Discoide
LM 731-732



Strumenti per la rimozione del materiale in eccesso

Scaler di rimozione materiale in eccesso
LM 785-795

- rimozione di materiale adesivo, cemento e otturazioni in composito
- la lama estremamente affilata permette di eliminare il materiale in eccesso dagli spazi interprossimali



Miniscaler di rimozione del materiale in eccesso
LM 784-794

- strumento sottile con lama estremamente affilata per la rimozione del materiale in eccesso dagli spazi interdentali particolarmente stretti



Strumento di rimozione delle otturazioni

Strumento di rimozione delle otturazioni
LM 764-766

- una lama è a forma di sonda, l'altra a forma di cuneo
- per la rimozione di otturazioni provvisorie e corone
- per la rimozione di ponti durante le prove




Crown On e Crown Off

Ideale per il posizionamento e la rimozione di corone, intarsi, ponti e faccette provvisorie. Disponibile solo con manico LM-ErgoMax (XSi).


Crown On I LM 761 XSi

- singolo

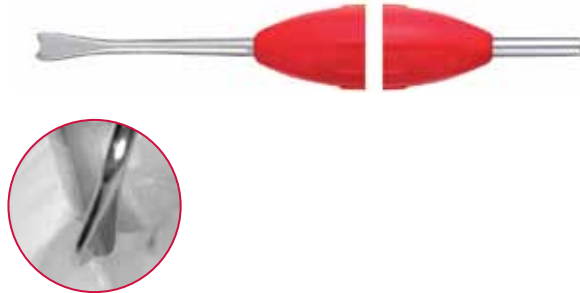


Crown On II LM 762-763 XSi

- lama a doppia angolazione con spirale a 45 gradi
- l'estremità lavorante appiattita ha una cavità nel mezzo per stabilizzare lo strumento sulla superficie occlusale durante il movimento di pressione sulla corona

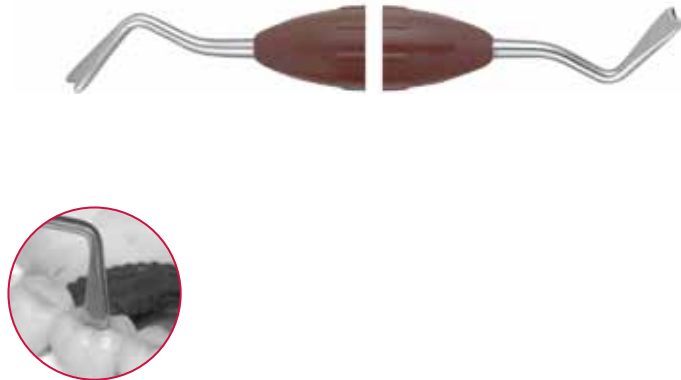

Crown Off LM 767-768 XSi

- lama a doppia angolazione con spirale a 45 gradi
- può essere utilizzato per tutte le necessità di rimozione dal cavo orale

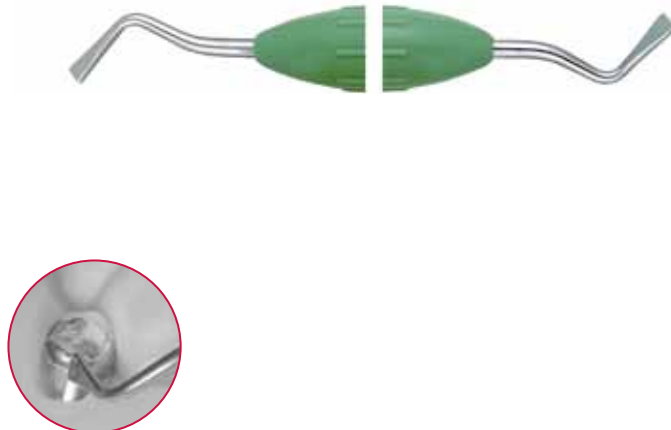

Viene eseguita un'incisione partendo dalla parte inferiore della corona fino alla superficie occlusale. L'incisione dovrebbe essere così profonda da raggiungere il cemento. L'estremità lavorante del Crown Off viene posizionata longitudinalmente nell'incisione e ruotata come per aprirla. La lama deve essere ruotata fino a che la corona si allenta e si solleva. La lama rimane saldamente nell'incisione ed è facilmente controllabile anche quando si esercita una forza rilevante.

Portastrisce LM-Cello

Portastrisce LM-Cello
LM 2010 C

Per la soluzione di molti problemi clinici.



BREVETTATO

Profilassi

- rimozione della placca dentale dalle zone di contatto
- preparazione all'uso del filo interdentale; per il paziente è più facile pulire da solo i suoi spazi interdentali
- il nastro può essere usato per distribuire meglio la pasta sulle superfici prossimali durante la finitura

Conservativa

- finitura delle superfici prossimali e di contatto
- finitura durante le tecniche con diga o matrice


Trattamento estetico e protesico

- finitura del cemento su faccette, intarsi e corone

Ortodonzia

- rifinitura dello smalto

Usare gli anelli colorati LM per identificare le strisce pre-inserite per le superfici mesiali (arancione) e distali (blu).

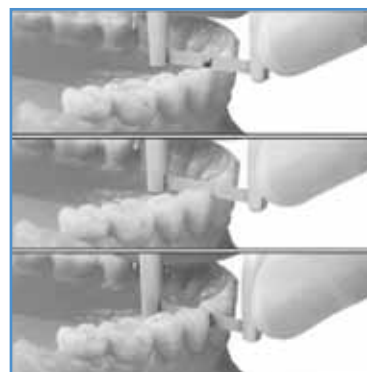

Strisce disponibili: Confezione 50 pz granulometria 60µ

Strisce con spazi vuoti



LM 5502 un lato 2 mm



LM 5503 un lato 3 mm



LM 5503D doppio lato 3 mm

Strisce senza spazi vuoti



LM 5512 un lato 2 mm



LM 5513 un lato 3 mm



LM 5513D doppio lato 3 mm

- la striscia liscia viene usata quando il contatto è particolarmente stretto

Sicuro ed efficace!

Endodonzia

- Lime manuali e reamer
- Sonde canalari
- Escavatori canalari
- Otturatori endodontici
- Chirurgia endodontica



LM-EndoMax

Lime a reamer endodontici ad elevata ergonomia

Le lime endodontiche manuali LM con impugnatura di grandi dimensioni sono assolutamente ergonomiche. L'impugnatura in silicone morbido e spesso migliora la presa e rende la limatura e la rotazione più confortevoli. Le lime e i reamer LM-EndoMax aderiscono al contorno del canale pulendo tutte le superfici in modo uniforme ed efficace.

- sensibilità tattile migliorata
- maggior comfort di lavoro
- migliorata trasmissione di forza e torque
- marchi di identificazione ben visibili codifica colore secondo le specifiche ISO

Reamer LM-Endomax



I reamer LM hanno lame elicoidali flessibili a sezione triangolare. Lo strumento è indicato principalmente per la preparazione apicale di canali dritti, questo è il motivo per cui la lama può essere usata anche per tagliare. Per questo strumento, il movimento di preparazione rotatorio è il più efficace.

K-Files LM-EndoMax



Le lime K della LM hanno una lama estremamente flessibile a profilo triangolare. L'angolo di taglio più ampio aumenta l'efficacia dello strumento rispetto a uno strumento simile a profilo quadrato. I residui di preparazione possono essere rimossi dal canale più facilmente perché c'è più spazio tra le scanalature dello strumento. Le scanalature sono molto fitte e la punta è affilata, rendendo così lo strumento idealmente adeguato per la preparazione di canali dritti con movimenti di limatura e di rotazione. Per questo strumento, un breve movimento di preparazione di avanti-indietro è il più efficace.

Hedstroems LM-EndoMax




Le lame delle lime Hedstroem LM sono fresate invece di essere filettate come per gli altri strumenti radicolari. Sono particolarmente adatte per creare l'orifizio del canale radicolare (svasatura coronale). Le lime Hedstroem sono indicate solamente per movimenti di limatura avanti-indietro.

NiTi Files LM-EndoMax



Il materiale usato per le lime NiTi è diverso da quello usato per le lime K, mentre la forma è uguale. Il NiTi (Nickel Titanio) è un materiale elastico che ritorna alla sua forma originale dopo essere stato piegato o deformato. La particolare forma della punta dello strumento lo rende ideale per la preparazione di canali curvati. Entrambi i movimenti di limatura e rotazione sono adatti a questi strumenti.


LM-EndoMax Reamers

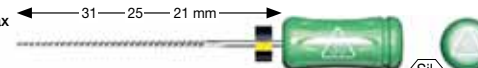

SSi

ø ISO	008	010	015	020	025	030	035	040	045	050	055	060	070	080
Assortimento 015-040			1	1	1	1	1	1						
Assortimento 045-080									1	1	1	1	1	1
Confezioni singole	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6

LM-EndoMax K-Files

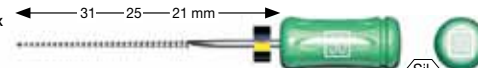


SSi

ø ISO	006	008	010	015	020	025	030	035	040	045	050	055	060	070	080
Assortimento 015-040				1	1	1	1	1	1						
Assortimento 045-080										1	1	1	1	1	1
Confezioni singole	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6

LM-EndoMax Reamers				
Lunghezza	21 mm	25 mm	31 mm	
	Codice	Codice	Codice	
Dimensione	LM	LM	LM	
008	300821	300825	300831	
010	301021	301025	301031	
015	301521	301525	301531	
020	302021	302025	302031	
025	302521	302525	302531	
030	303021	303025	303031	
035	303521	303525	303531	
040	304021	304025	304031	
045	304521	304525	304531	
050	305021	305025	305031	
055	305521	305525	305531	
060	306021	306025	306031	
070	307021	307025	307031	
080	308021	308025	308031	
015 - 040	3015-04021	3015-04025	3015-04031	
045 - 080	3045-08021	3045-08025	3045-08031	

LM-EndoMax K-Files				
Lunghezza	21 mm	25 mm	31 mm	
	Codice	Codice	Codice	
Dimensione	LM	LM	LM	
006	200621	200625	200631	
008	200821	200825	200831	
010	201021	201025	201031	
015	201521	201525	201531	
020	202021	202025	202031	
025	202521	202525	202531	
030	203021	203025	203031	
035	203521	203525	203531	
040	204021	204025	204031	
045	204521	204525	204531	
050	205021	205025	205031	
055	205521	205525	205531	
060	206021	206025	206031	
070	207021	207025	207031	
080	208021	208025	208031	
015 - 040	2015-04021	2015-04025	2015-04031	
045 - 080	2045-08021	2045-08025	2045-08031	


LM-EndoMax Hedstroems

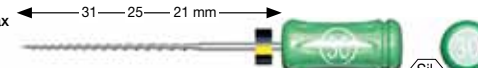

SSi

ø ISO	008	010	015	020	025	030	035	040	045	050	055	060	070	080
Assortimento 015-040			1	1	1	1	1	1						
Assortimento 045-080									1	1	1	1	1	1
Confezioni singole	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6

LM-EndoMax NiTi FILES

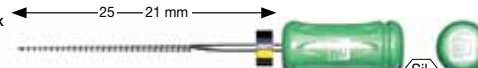

NiTi

ø ISO	015	020	025	030	035	040	045	050	055	060
Assortimento 015-040	1	1	1	1	1	1				
Confezioni singole	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6

LM-EndoMax Hedstroems				
Lunghezza	21 mm	25 mm	31 mm	
	Codice	Codice	Codice	
Dimensione	LM	LM	LM	
008	400821	400825	400831	
010	401021	401025	401031	
015	401521	401525	401531	
020	402021	402025	402031	
025	402521	402525	402531	
030	403021	403025	403031	
035	403521	403525	403531	
040	404021	404025	404031	
045	404521	404525	404531	
050	405021	405025	405031	
055	405521	405525	405531	
060	406021	406025	406031	
070	407021	407025	407031	
080	408021	408025	408031	
015 - 040	4015-04021	4015-04025	4015-04031	
045 - 080	4045-08021	4045-08025	4045-08031	

LM-EndoMax NiTi Files		
Lunghezza	21 mm	25 mm
	Codice	Codice
Dimensione	LM	LM
015	501521	501525
020	502021	502025
025	502521	502525
030	503021	503025
035	503521	503525
040	504021	504025
045	504521	504525
050	505021	505025
055	505521	505525
060	506021	506025
015-040	5015-04021	5015-04025

Sonda canale, Escavatori

Sonda canale radicolare

Sonda canale radicolare
LM 27-28



La punta dello strumento lunga e affilata facilita la localizzazione degli orifizi canalari e assicura l'accesso per gli strumenti di preparazione.



Importante! Usare gli strumenti solo per lo scopo per cui sono stati realizzati!

Escavatori canalari

Rispetto all'escavatore rotondo, quello per il canale radicolare dispone di una lama nettamente più angolata e di un gambo inferiore più lungo.

Escavatore canale radicolare, 1.0 mm
LM 612-622



Escavatore canale radicolare, 1.5 mm
LM 632-642



Escavatore canale radicolare, 2.0 mm
LM 652-662



- i gambi estesi e correttamente angolati, insieme alle angolazioni altamente efficaci della lama, permettono la preparazione di ogni tipo di cavità pulpare
- efficaci per la pulizia delle camere pulpari e per la localizzazione dei canali radicolari, così come per la rimozione di otturazioni provvisorie

Otturatore endodontico

Otturatore endodontico, 0.5 - 1.0 mm LM 41-42

- punte 0,5 e 1,0 mm
- per la condensazione verticale nel canale radicolare



Chirurgia endodontica

Per otturazioni retrograde

Per la rimozione di dentina demineralizzata, guttaperca e cemento dalla punta della radice. Buona visibilità.



Apexcavator GFV 0.8 mm LM 683-684

- mesiale, distale e linguale



Apexcavator GFV 1.0 mm LM 613-614

- mesiale, distale e linguale



Apexcavator GFV 0.8 - 1.0 mm LM 685-616

- buccale



Apex Packer
GFV 0.4 - 0.6 mm
LM 410-420



Apex Packer
GFV 0.8 - 1.0 mm
LM 430-440



Estrazione

- Leve lussatrici
- Leve per estrazione



LM strumenti per estrazione

nuovo

Nuova gamma di leve lussatrici e leve per estrazione con la conosciuta ergonomia e sensibilità tattile di LM.

- Design ergonomico – ogni leva è pratica da maneggiare e facile da ruotare
- Superficie LM-ErgoTouch sicura - presa leggera e antiscivolo.
- Impugnatura bilanciata e controllata
- Leggere – più maneggevoli
- Facilmente riconoscibili dal colore – identificazione agevole
- Super acciaio LM-DuraGradeMAX – lame robuste e affilate.
- Ottima tenuta della giuntura impugnatura/lama – massima igiene



LM-TwistOut elevatori

Gli strumenti LM-TwistOut sono adatti per l'estrazione dei denti in situazioni in cui è necessario applicare grande forza o torsione.



LM-TwistOut S3
LM 814230

- retto 3 mm



LM-TwistOut S5
LM 814250

- retto 5 mm



LM-TwistOut C3
LM 814430

- curvo 3 mm



LM-TwistOut C5
LM 814450

- curvo 5 mm



LM-LiftOut leve lussatrici

nuovo

Le leve lussatrici M-LiftOut consentono l'estrazione del dente nel modo meno traumatico possibile. Ciò è importante per permettere una rapida guarigione e il posizionamento del futuro impianto. La punta sottile viene introdotta nello spazio parodontale e fatta avanzare lentamente verso l'apice della radice, mentre si ruota lo strumento delicatamente in senso orario ed antiorario. LM-LiftOut non è adatta come leva di estrazione.

Importante! Utilizzare gli strumenti solo per lo scopo a cui sono destinati!



LM-LiftOut S2
LM 812220

- retto 2.5 mm



LM-LiftOut S3
LM 812230

- retto 3 mm



LM-LiftOut S5
LM 812250

- retto 5 mm



LM-LiftOut C3
LM 812430

- curvo 3 mm



LM-LiftOut C5
LM 812450

- curvo 5 mm



Manutenzione degli strumenti di estrazione

nuovo

Cassette per gli strumenti di estrazione

Gli strumenti LM-LiftOut e LM-TwistOut sono forniti in una comoda cassetta che protegge lo strumento e l'operatore durante il processo di pulizia e sterilizzazione.

La cassetta evita che lo strumento perfori il sacchetto di sterilizzazione, assicurando la conservazione della sterilità. La cassetta può essere identificata con un codice colore mediante il sistema di bottoni LM, vedi pagina 77.

La cassetta per strumenti di estrazione LM è compatibile con il vassoio LM-ServoMax, vedi pagina 76.



Mola di affilatura LM 818002

Affilare di tanto in tanto le leve per estrazione con la mola rotonda di affilatura. Un modo semplice e veloce per mantenerle in condizioni ottimali e sempre pronte all'uso.



Ortodonzia



- Apparecchi mobili
- Manico specchietto per ortodonzia
- Pressalegatura
- Strumento per piegare l'arco vestibolare distalmente

Apparecchi mobili

LM-Activator

LM-Activator™ è un apparecchio ortodontico per il trattamento precoce e per guidare l'eruzione dei denti. Può essere utilizzato anche nella dentizione mista tardiva o nella dentizione permanente precoce.

L'apparecchio, o standard e funzionale, è modellato con una forma corrispondente all'occlusione ideale in diverse dimensioni. 37 diversi modelli e combinazioni di dimensioni permettono di selezionare l'LM-Activator adatto al paziente senza la necessità di modifiche individuali.


LM-Activator simultaneamente espande le arcate dentali, allinea i denti e porta in avanti la mandibola per la correzione di Classe II.

Premodellato a forma dell'occlusione ideale in diverse dimensioni:

- Allinea i denti
- Espande gli archi
- Avanza la mandibola

La flangia linguale e lo scudo labiale alto mantengono la mandibola in posizione corretta mentre il paziente sta dormendo, impedendo che l'apparecchio cada - ciò è particolarmente utile per i pazienti con overjet eccessivo.

Quattro modelli - diversa lunghezza e spessore della sezione molare per adattarsi alla malocclusione e all'eruzione dei denti del singolo paziente.

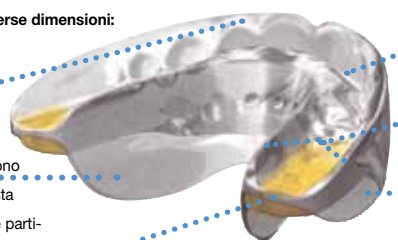

Gli spazi per i denti allineano incisivi, canini e primi premolari

Le pareti buccale e linguale allineano i secondi premolari e i molari.

Realizzato in silicone sicuro ed elastico. Può essere sterilizzato in autoclave o disinfettato dal paziente in acqua bollente.

Trattamento e indicazioni

- Consigliato
 Può essere considerato

		Dentizione decidua	Dentizione mista precoce	Dentizione mista tardiva	Dentizione permanente precoce
Classe II	Acuto				
	Moderato				
	Lieve				
Overjet, overbite	Acuto				
	Moderato				
	Lieve				
Affollamento anteriore (incisivi e canini)	Acuto				
	Moderato				
	Lieve				
Rotazione dei denti anteriori	Acuto				
	Moderato				
	Lieve				
Morso incrociato anteriore dento-alveolare di 1-2 denti	Acuto				
	Moderato				
	Lieve				
Morso a forbice	Acuto				
	Moderato				
	Lieve				
Sorriso gengivale	Acuto				
	Moderato				
	Lieve				
Morso aperto (Modello alto di LM-Activator)	Acuto				
	Moderato				
	Lieve				

LM-Activator é controindicato nelle Terze Classi Scheletriche

LM-Activator Low

Il modello Low di LM-Activator è applicabile a molti casi diversi, si prega di consultare la tabella delle indicazioni. Il modello basso è disponibile in versione Low Short o Low Long.

Low Short - Modello con una sezione molare più corta, per pazienti i cui secondi molari non sono ancora spuntati. Fornito in una scatola gialla.

Codice ordine	Dimensioni
94010LS	10
94015LS	15
94020LS	20
94025LS	25
94030LS	30
94035LS	35
94040LS	40
94045LS	45
94050LS	50
94055LS	55
94060LS	60
94065LS	65
94070LS	70



Low Long - Modello con una sezione molare più lunga, per pazienti i cui secondi molari sono già spuntati. Fornito in una scatola azzurra.

Codice ordine	Dimensioni
94040L	40
94045L	45
94050L	50
94055L	55
94060L	60
94065L	65
94070L	70



LM-Activator High

Il modello High di LM-Activator è più voluminoso nella regione dei secondi premolari e dei molari. È stato specificamente progettato per il trattamento dei casi di morso aperto scheletrico e dento-alveolare.

High Short - Modello con una sezione molare più corta, per pazienti i cui secondi molari non sono ancora spuntati. Fornito in una scatola arancione.

Codice ordine	Dimensioni
94020HS	20
94025HS	25
94030HS	30
94035HS	35
94040HS	40
94045HS	45
94050HS	50
94055HS	55
94060HS	60
94065HS	65
94070HS	70



High Long - Modello con una sezione molare più lunga, per pazienti i cui secondi molari sono già spuntati. Fornito in una scatola verde.

Codice ordine	Dimensioni
94045H	45
94050H	50
94055H	55
94060H	60
94065H	65
94070H	70



**Kit introduttivo
LM-Activator LM 94500**

Il Kit introduttivo contiene tutto il necessario per iniziare a utilizzare LM-Activator: 24 pezzi dei modelli e delle dimensioni più comunemente utilizzati di LM-Activator, 5 pezzi di OrthoSizer con impugnature, materiale motivazionale paziente (poster, adesivi e carte) e una fresa in silicone.


Materiale motivazionale

La cooperazione del paziente è fondamentale per il successo del trattamento. Il primo mese è importantissimo per acquisire l'abitudine ad utilizzare l'apparecchio (poiché la creazione di un'abitudine in generale richiede 3-4 settimane di regolare uso quotidiano). Per motivare il paziente e la sua famiglia, è disponibile materiale in base alle età, per preadolescenti e adolescenti. È importante assicurarsi che il paziente e la sua famiglia siano consapevoli che l'uso irregolare può essere equivalente a non effettuare il trattamento.

Istruzioni paziente in inglese 30 pezzi

LM 94533

Carte ricompensa

Skateboard 75 pezzi

LM 94511

Calcio 75 pezzi

LM 94512

Bicicletta 75 pezzi

LM 94513

Cavallo e cavaliere 75 pezzi

LM 94514

Materiale motivazionale paziente
(poster e adesivi) 15 pezzi

LM 94531

Un poster per il controllo dell'uso diurno e notturno. È strutturato come un gioco con un percorso progressivo sul quale attaccare tutti i giorni degli adesivi per indicare l'uso corretto.



LM-OrthoSizer

LM-OrthoSizer è un misuratore per aiutare nella selezione delle dimensioni adeguate. Misura la distanza tra gli incisivi superiori (dalla superficie distale dell'incisivo laterale sinistro alla superficie distale dell'incisivo laterale destro) e indica la dimensione corrispondente. Può essere usato con o senza manico.

LM-OrthoSizer con manico (standard)
LM-OrthoSizer con manico (attacco conico)
LM-OrthoSizer senza manico

LM 942526
LM 942826
LM 9400

Orthosizer è compatibile anche con il manico per specchietto LM 25 e LM 28 XSI. Maggiori informazioni a pag. 12.

**LM-Trainer**

LM-Trainer Medium
LM 94100T

Spazi per incisivi e canini. Lip bumper.



LM-Trainer Small
LM 94100S

Più piccolo e più leggero di LM-Trainer Medium. Spazio per incisivi. Lip bumper.



LM-Trainer Braces
LM 94100TB

Utilizzato in combinazione con bracket e arco ortodontico, sposta la mandibola in avanti per la correzione di Classe II. Previene l'irritazione e le ferite dei tessuti molli. Lip bumper.



Strumenti per ortodonzia

Strumenti per ortodonzia

Manico specchietto, per ortodonzia LM 25-26 XSi

- disponibile solo con manico LM-ErgoMax (XSi)
- per la misurazione dell'overjet sagittale e dell'overbite verticale
- scala millimetrata, lunghezza totale 25 mm



nuovo

Legatura On-Off SL LM 414-17CL XSi

- disponibile solo con manico LM-ErgoMax (XSi)



L'estremità esplorativa dello strumento può essere utilizzata sia per l'applicazione sia per la rimozione delle legature. Le legature possono essere poste sulla parte inferiore. L'estremità biforcuta è particolarmente adatta per accompagnare un anello di legatura, ad esempio la quarta ala di un bracket.

Pressalegatura LM 414-415



Pressalegatura - Scaler U15 LM 414-150




Applicatore per legature in plastica LM 416-417



Arch Wire Tucker LM 412-413 XSi

- disponibile solo con manico LM-ErgoMax (XSi)

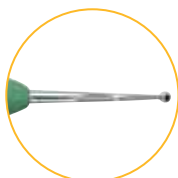

Piegare l'estremità distale di un arco può essere problematico. Lo spazio di lavoro è limitato e il filo è rigido. Lo strumento LM-Arch Wire Tucker a doppia estremità facilita la piegatura. Le estremità a forma di sfera appiattita hanno un foro da 1 millimetro, nel quale si può infilare e piegare facilmente il filo ortodontico. La lama è lunga e si adatta anche a spazi stretti.

Altri prodotti

- Dispositivi a ultrasuoni e di pulizia
- Kit di strumenti
- Prodotti speciali
- Manutenzione razionale degli strumenti



Dispositivi a ultrasuoni e di pulizia

Dispositivi a ultrasuoni e di pulizia LM-ProPower

Gli LM-ProPower sono dei versatili dispositivi ad ultrasuoni e di profilassi ad aria per il trattamento orale professionale. La particolare ergonomia, insieme all'esclusiva illuminazione a LED, l'elettronica avanzata e le punte di lunga durata LM-DuraGrade MAX rendono i dispositivi LM-ProPower ideali per tutte le procedure che richiedono una precisione elevata. Oltre alla detartrasi e alla lucidatura, essi infondono potenza a numerosi altri trattamenti in diversi ambiti clinici.

Tre attributi di eccellenza Ergonomia – Economia – Igiene

Manipolo con ergonomia esclusiva

I manipoli LM-ProPower sono dotati di una particolare illuminazione a LED che illumina efficacemente l'area di trattamento, consentendo un'ottima visibilità e riducendo lo sforzo per gli occhi. Grazie ai rivestimenti in silicone intercambiabili LM-ErgoGrip, si dispone di una confortevole impugnatura anti scivolamento. Nel manipolo a ultrasuoni autoclavabile è integrata la regolazione dell'acqua, consentendo così una facile e rapida regolazione dello spray.



ErgoGrips in silicone autoclavabili intercambiabili



LM-ErgoGrip LED
LM 10094



LM-ErgoGrip Focus LED
LM 10099

LM-ErgoGrip LED con ampie lenti ad anello e LM-ErgoGrip Focus LED con lenti focalizzate garantiscono una comoda impugnatura antiscivolo e una buona sensibilità al tatto. Il materiale morbido attenua le vibrazioni e mantiene le vostre mani calde, evitando la Sindrome del Tunnel Carpale e i problemi di circolazione sanguigna.

Gli LM-ErgoGrips sono asportabili e autoclavabili, eliminando così la necessità di acquistare diversi manipoli costosi. Pochi LM-ErgoGrips garantiranno l'efficienza del vostro studio, paziente dopo paziente.

Pannello di comando intelligente

Il pratico pannello di comando di LM-ProPower semplifica il trattamento ad ultrasuoni e le procedure di pulizia. La potenza degli ultrasuoni e della lucidatura è regolata tramite i pulsanti di modalità operativa sul pannello di comando. Il sistema automatico di pulizia si attiva premendo un singolo pulsante.

Contenitori ad attacco rapido

I contenitori trasparenti dell'acqua, della polvere e delle soluzioni medicamentose sono applicati al corpo del dispositivo e sono facilmente sostituibili. La posizione verticale dei contenitori evita problemi di perdite e i livelli di riempimento del liquido e polvere sono sempre visibili.



Comando a pedale dinamico

Accendete/spengnete l'illuminazione a LED per la diagnostica, controllate la potenza della modalità di lavoro scelta, usate la funzione speciale di pulizia dei denti a getti d'acqua e la funzione di irrigazione in modalità scaling con il pedale e tenete libere le vostre mani per eseguire il trattamento sul paziente.

Tutti i dispositivi LM-ProPower sono disponibili con connettore per acqua di rubinetto o con connettore rapido per l'erogatore di soluzione medicamentosa/acqua. Essi possono anche essere integrati nell'unità dentale.

LM-ProPower UltraLED - Ultrasuoni oltre alla tradizione

Le caratteristiche di LM-ProPower Ultra LED si estendono a tutte le aree di trattamento a ultrasuoni.

La sua ampia gamma di potenza e il vasto assortimento di punte lo rendono estremamente versatile per ogni procedura. Questo dispositivo multifunzionale offre soluzioni a ultrasuoni non solo per il tradizionale trattamento di detartrasi e per la parodontologia, ma anche per l'endodonzia, la chirurgia apicale e i trattamenti sterili, l'implantologia e la restaurativa.

- Quattro funzioni utili:
 1. Illuminazione a LED per la diagnosi
 2. Vibrazioni ultrasoniche con acqua
 3. Modo a secco senza acqua
 4. Modo irrigazione senza vibrazione
- Regolazione dell'acqua nel manipolo
- Scegliendo il modo operativo corretto per la punta usata si imposta il limite massimo di potenza al livello raccomandato
- La funzione di pulizia viene attivata premendo un singolo pulsante
- Manipolo autoclavabile

Per ulteriori informazioni sulle punte, vedere le pagine 65-70.

IntroKit UltraLED Tutto incluso

- 3 ErgoGrips FocusLED
- 3 Punte ultrasoniche (PE-37, -41PS, -40H)
- 3 Chiavette con torque per le punte



Dati Tecnici

LM-ProPower UltraLED	LM 100721 (connettore acqua di linea) LM 100731 (dispenser per liquidi)
L x P x A	270 x 140 x 165 mm (senza bottiglia e contenitore per polvere)
Peso	2900 g
Voltaggio	100 V CA, 50-60 Hz
115 V CA, 50-60 Hz	
230 V CA, 50-60 Hz	
Cavo alimentazione	Separato con protezione di messa a terra
Assorbimento potenza	Max. 40 VA
Assorbimento potenza Scaler	Max. 24 VA
Emissione Potenza Scaler	Max. 10 W (2-28 kHz, regolazione automatica)
Pressione fornitura acqua con fornitura di acqua esterna	1-10 bar (0,1-1,0 MPa, 14,5-145 PSI)
Consumo acqua	10-50 ml/min
Volume bottiglia	500 ml (fornitura acqua interna)



LM-ProPower AirLED – Visibilità superiore

LM- ProPower AirLED è il primo strumento per profilassi con illuminazione. Le potenti luci LED, il preciso getto di polvere e il design anti intasamento che assicurano una continuità operativa affidabile, rendono questo dispositivo un perfetto strumento di pulizia. Le sue funzioni consentono la pulizia in diverse ambiti clinici.

AirLED permette un'eccellente visibilità per la diagnosi delle decolorazione e delle macchie. Il suo spray di polvere concentrato, la gamma di potenza regolabile e il manipolo ergonomico creano le condizioni perfette per ottenere il migliore effetto di lucidatura. Il contenitore della polvere trasparente, rimovibile e posizionato sul lato del dispositivo alleggerisce il manipolo, facilitando anche il controllo del livello di riempimento.

Massima igiene

- La facile ed efficiente funzione di pulizia assicura un funzionamento affidabile e continuo.
- Il design anti intasamento mantiene l'acqua e la polvere separati fino all'ultimo secondo.
- Il getto d'acqua di pulizia per l'area di trattamento è facilmente attivabile tramite il comando a pedale.
- Gli ugelli asportabili e autoclavabili sono facili da pulire.

IntroKit AirLED Tutto incluso

- 2 ErgoGrips
- 2 ugelli
- 2 x 180 g. polvere da lucidatura



Technical data

LM-ProPower AirLED	LM 100722 (connettore acqua di linea) LM 100732 (dispenser per liquidi)
L x P x A	270 x 140 x 165 mm (senza bottiglia e contenitore per polvere)
Peso	3200 g
Voltaggio	100 Vac, 50-60 Hz
115 Vac, 50-60 Hz	
230 Vac, 50-60 Hz	
Cavo alimentazione	Separato con protezione di messa a terra
Assorbimento potenza	Max. 40 VA
Assorbimento potenza acqua	1-10 bar (0,1-1,0 MPa, 14,5-145 PSI)
Pressione fornitura acqua	con fornitura di acqua esterna
Consumo acqua	10-50 ml/min
Volume bottiglia	500 ml (fornitura acqua interna)
Pressione fornitura aria	4 - 10 bar (0,4 - 1,0 MPa, 58 - 145 PSI)
Consumo aria	Max. 20 l/min
Capacità contenitore polvere	45 g



LM-ProPower polvere per lucidante (bicarbonato di sodio) 8 x 180 g

LM 10076

- Dimensione granuli 100-120 µm

Dispositivi a ultrasuoni e di pulizia

LM-ProPower CombiLED – L'esclusivo e potente strumento

LM-ProPower CombiLED unisce le diverse caratteristiche di AirLED e di UltraLED per creare uno strumento versatile che può essere usato per un'ampia gamma di trattamenti ad ultrasuoni e di pulizia.

Esso è il più innovativo e potente strumento dall'azione delicata.

Dati Tecnici

LM-ProPower CombiLED	LM 10074 (connettore acqua di linea) LM 10075 (dispenser per liquidi)
L x P x A	270 x 140 x 165 mm (senza bottiglia e contenitore per polvere)
Peso	3400 g
Voltaggio	100 V CA, 50-60 Hz 115 V CA, 50-60 Hz 230 V CA, 50-60 Hz
Cavo alimentazione	Separato con protezione di messa a terra
Assorbimento potenza	Max. 40 VA
Assorbimento potenza Scaler	Max. 24 VA
Emissione Potenza Scaler	Max. 10 W (24-28 kHz, regolazione automatica)
Pressione fornitura acqua con fornitura di acqua esterna	1-10 bar (0,1-1,0 MPa, 14,5-145 PSI)
Consumo acqua	10-50 ml/min
Volume bottiglia	500 ml (fornitura acqua interna)
Pressione fornitura aria	4 - 10 bar (0,4 - 1,0 MPa, 58 - 145 PSI)
Consumo aria	Max. 20 l/min
Capacità contenitore polvere	45 g



Tutti i dispositivi LM-ProPower sono disponibili con connettore per acqua di rubinetto o con connettore rapido per l'erogatore di soluzione medicamentosa/acqua. Essi possono anche essere integrati nell'unità dentale.



IntroKit CombiLED Tutto incluso

- 5 ErgoGrips
- 3 Punta ultrasoniche (PE-37, -40H, -41PS)
- 3 Chiavette con torque
- 2 Ugelli
- 2 x 180 g. polvere per profilassi

LM-ProPower soluzione sterile

nuovo

LM-ProPower SteriLED
LM 10084

Il manipolo LM-ProPower SteriLED è caratterizzato da un'ergonomia di alto livello, è leggero e ben bilanciato. Non richiede altri componenti per il collegamento al dispenser della soluzione sterile. Possiede un'efficientissima luce a LED per una visibilità ottimale. Può essere sfilato rapidamente e in modo semplice per essere sterilizzato. LM-ProPower SteriLED deve essere collegato all'ablatores LM-ProPower UltraLED.

Il manipolo è compatibile con la normale gamma di punte LM. È disponibile un'ampia serie di modelli di punte periodontiche, endontiche e speciali per applicazioni sterili o di medicazioni, consultare le pagine 65-70.

LM-ProPower SteriKit
LM 10080

Sistema sicuro ed affidabile che oltrepassa completamente il sistema di alimentazione dell'acqua. Sono disponibili 8 punte sterili per chirurgia apicale. Lo SteriKit ha un sistema di irrigazione pressurizzato che consente un'installazione facile ed economica. Non è necessaria alcuna costosa pompa peristaltica. SteriKit è compatibile con tutti i dispositivi a ultrasuoni Amdent e LM. Aggiornate la vostra unità con una maggior funzionalità!

LM-ProPower SteriKit contiene una sacca pressurizzata con gancio, un manometro, una pompa e un set di irrigazione.
Accessori: Supporto SteriKit, liquido sterile e set di irrigazione.
LM 10083



Punte per ultrasuoni LM

Nuova gamma di punte per ultrasuoni LM - la qualità più elevata per tutte le vostre necessità

- Design sottile - miglior accessibilità e meno ombre
- Acciaio LM-DuraGradeMax estremamente duraturo - elevata resistenza all'usura
- Gamma completa - soluzioni per trattamenti parodontali, endodontici, di chirurgia apicale e conservativi
- Codifica della modalità di lavoro - impostazione della potenza facile e sicura
- Compatibili con i dispositivi LM e Amdent


- Ablazione
- Escavazione minimamente invasiva
- Endodonzia
- Chirurgia apicale
- Applicazioni speciali
- Trattamento sterile



Codifica della modalità di lavoro



Max 40 %

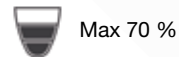

Max 70 %



Max 100 %



Scelta di chiavette per punte



Chiavetta universale
LM 10089S



Chiavetta con torque
• Design sottile
LM 10088S
• Design esagonale
LM 10088



Chiavetta supporto file
LM 10087



Chiavetta universale in
plastica
LM 10089

Ablazione

L'ablazione è un trattamento di precisione. La scelta corretta dello strumento a ultrasuoni è di primaria importanza per ottenere la completa bonifica parodontale. La nostra ampia gamma di punte vi offre la massima libertà di scelta.

Rimozione di concrezioni tenaci

PE-31 LM 100131

Ablazione linguale, vestibolare
e prossimale sopragengivale.



PE-32 LM 100132

Ablazione linguale e
vestibolare sopragengivale.



PE-39 LM 100139

Ablazione universale, linguale
e vestibolare sopragengivale.



PE-41A LM 100141A


Ablazione universale, linguale e
vestibolare sopragengivale.



Universale

PE-37 LM 100137

Universale, indicata soprattutto per
ablazione subgengivale, forcazioni,
ablazione fine sopragengivale e
rimozione di macchie

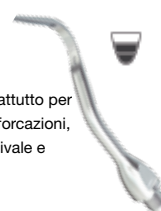

PE-37L LM 100137L

Universale, indicata soprattutto
per ablazione subgengivale,
forcazioni, ablazione fine
sopragengivale e rimozione di
macchie. La punta è inclinata a
sinistra per un miglior accesso alle
forcazioni.



Punte per ultrasuoni

Codifica della modalità di lavoro

Max 40 %



Max 70 %



Max 100 %



Universale

PE-37R LM 100137R

Universale per ablazione subgingivale, forcazioni, ablazione fine sopragingivale e rimozione di macchie. La punta è inclinata a destra per un miglior accesso alle forcazioni.




PE-41PF LM 100141PF

Ablazione linguale, vestibolare e prossimale sopragingivale.



PE-41P LM 100141P

Universale per ablazione linguale e vestibolare sopragingivale. Può essere usata anche per le tasche poco profonde.

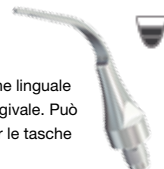

PE-41AF LM 100141AF

Ablazione linguale, vestibolare e prossimale sopragingivale. Può essere usata anche per la rimozione di eccessi.



Parodontologia

PE-33 LM 100133

Indicata per ablazione subgingivale e forcazioni.



PE-33L LM 100133L

Indicata per ablazione subgingivale e forcazioni. La punta è inclinata a sinistra per un miglior accesso alle forcazioni.



PE-33R LM 100133R

Indicata per ablazione subgingivale e forcazioni. La punta è inclinata a destra per un miglior accesso alle forcazioni.



PE-38 LM 100138

Indicata per ablazione linguale e vestibolare subgingivale e forcazioni. Adatta anche per ablazione fine sopragingivale e rimozione di macchie.



PE-38L LM 100138L

Indicata per ablazione subgingivale e forcazioni. Adatta anche per ablazione fine sopragingivale e rimozione di macchie. La punta è inclinata a sinistra per un miglior accesso alle forcazioni.




PE-38R LM 100138R

Indicata per ablazione subgingivale e forcazioni. Adatta anche per ablazione fine sopragingivale e rimozione di macchie. La punta è inclinata a destra per un miglior accesso alle forcazioni.



PE-40 LM 100140

Indicata per ablazione linguale e vestibolare subgingivale più profonda. Adatta anche per ablazione fine sopragingivale e rimozione di macchie.

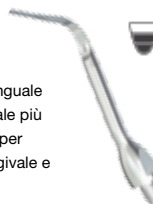


PE-40L LM 100140L

Indicata per ablazione subgingivale più profonda e forcazioni dei molari. La punta è inclinata a sinistra per un miglior accesso alle forcazioni.



PE-40R LM 100140R

Indicata per ablazione subgingivale più profonda e forcazioni dei molari. La punta è inclinata a destra per un miglior accesso alle forcazioni.

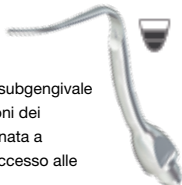


PE-40H LM 100140H

Indicata per ablazione subgingivale più profonda. Adatta soprattutto per l'ablazione linguale degli incisivi.



PE-41PS LM 100141PS

Indicata per ablazione linguale e vestibolare subgingivale più profonda. Adatta anche per ablazione fine sopragingivale e rimozione di macchie.

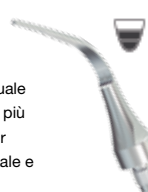

Ablazione

Codifica della modalità di lavoro

Max 40 %



Max 70 %



Max 100 %




Mantenimento implantare

IM-1

LM 100301 conf. da 4 pz.


Per la rimozione di tartaro da impianti, abutment e corone. L'estremità di lavoro è ricoperta con materiale PEEK® per evitare danni o decolorazione degli impianti. Da utilizzare con il supporto strumenti IH-1 o IH-2.

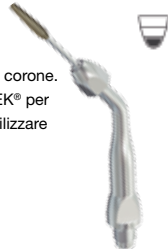

IM-2

LM 100302 conf. da 4 pz.

Stesso design della IM-1, ma con estremità di lavoro angolata per un accesso migliore alle superfici difficili da raggiungere. Da utilizzare con il supporto strumenti IH-1 o IH-2.

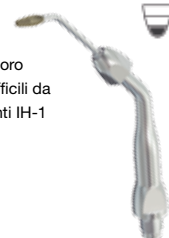

Ablazione

Escavazione minimamente invasiva

Grazie alle punte per ultrasuoni diamantate, è possibile eseguire piccole preparazioni senza un'eccessiva rimozione di sostanza dentale circostante. Le punte possono essere facilmente utilizzate anche per i margini coronali e la pulizia di fessure. Il diametro ridotto delle punte le rende particolarmente adatte per l'utilizzo in pedodonzia e il basso livello di rumore rispetto a quello degli strumenti rotanti e apprezzato soprattutto dai pazienti nervosi.

MI-1

LM 100601

Punta dritta, usata soprattutto per incisivi e superfici maggiormente accessibili.



MI-2

LM 100602

Leggermente contro-angolata, usata per il lavoro linguale e vestibolare sui molari.



MI-3

LM 100603

Contro-angolata, usata sulle zone linguali, vestibolari e distali.



MI-4

LM 100604

Fortemente contro-angolata, usata sulle zone linguali, vestibolari e distali di molari e forcazioni.



Escavazione minimamente invasiva

Endodonzia


Le punte per ultrasuoni possono essere utilizzate in molte applicazioni endodontiche. Si dimostrano veramente eccellenti per la rimozione di perni, l'asportazione di dentina nella camera pulpare, il rilevamento e allargamento degli orifizi, la preparazione di canali, la rimozione di strumenti rotti e la pulizia dei canali preparati.

Camera pulpare

EN-1

LM 100201


A forma di pallina. Per la rimozione di corone, ponti e diversi tipi di perni applicati con cementi. La punta viene posizionata contro al perno e quindi mossa in modo circolare per rimuoverlo. Lunghezza 17 mm.

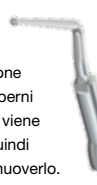

EN-2

LM 100202


Punta piatta e rotonda diamantata. Usata per levigare i frustoli di polpa sul fondo della camera pulpare. Rispetto agli strumenti rotanti, il rischio di perforare il dente è basso. Lunghezza 17 mm.

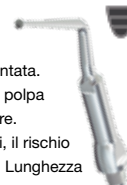

EN-3

LM 100203

Punta conica diamantata multifunzionale, soprattutto per l'utilizzo nella camera pulpare per la rimozione di frustoli, dentina e vecchie otturazioni. Indicata anche per localizzare aperture nascoste. Lunghezza 17 mm.

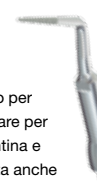

EN-4

LM 100204

Punta rotonda diamantata per la rimozione di dentina, per spostare gli angoli delle linee d'accesso, per eseguire una scanalatura nella parete di accesso mesiale per raggiungere i canali secondari mesio-vestibolari (MB2) e per accedere con precisione e velocità alla camera pulpare. Lunghezza 16 mm.



EN-12

LM 100212

Punta diamantata piatta. Usata nella camera pulpare per la rimozione di frustoli, dentina e vecchie otturazioni. Rispetto agli strumenti rotanti, il rischio di perforare il dente è basso.



Endodonzia

Punte per ultrasuoni

Preparazione del canale

**EN-5
LM 100205**

Usata nella parte coronale e apicale del canale radicolare. Usata anche per la rimozione di perni, per allargare i canali calcificati, rimuovere otturazioni dure, strumenti rotti e altre ostruzioni all'interno del canale. Lunghezza 17 mm.

**EN-6
LM 100206**

Usata soprattutto nel terzo coronale del canale per scavare intorno al perno. Anche per rilevare canali calcificati a metà radice. La fornitura d'acqua viene diretta verso l'estremità della punta per aumentare il lavaggio e il raffreddamento dell'area trattata. Lunghezza 19 mm.

**EN-7
LM 100207**

Stessa forma della punta EN-5, ma più lunga di 2 mm e stesso campo di applicazione. Usata nel terzo coronale, medio e apicale del canale radicolare. Lunghezza 19 mm.

**EN-8
LM 100208**

Stessa forma della punta EN-5, ma più lunga di 7 mm e stesso campo di applicazione. Usata nel terzo coronale, medio e apicale del canale radicolare. Lunghezza 24 mm.

**EN-13
LM 100213**

Punta diamantata usata insieme al supporto strumenti IH-1, IH-2, IHS-1 o IHS-2.


Usata nel terzo coronale, medio e apicale del canale radicolare. Usata per la rimozione di perni, per allargare i canali calcificati, rimuovere otturazioni dure, strumenti rotti e altre ostruzioni all'interno del canale.

Lunghezza 17 mm.

**EN-14
LM 100214**

Usata insieme al supporto strumenti IH-1, IH-2, IHS-1 o IHS-2. Usata come plugger per la condensazione laterale della guttaperca.

Lunghezza 25 mm.

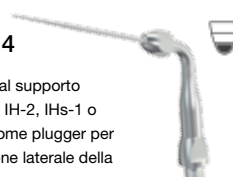**EN-15
LM 100215**

Usata insieme al supporto strumenti IH-1, IH-2, IHS-1 o IHS-2.

Utilizzando la EN-15 in un canale radicolare riempito di fluido, le vibrazioni ultrasoniche puliscono il canale molto efficacemente. L'effetto di cavitazione che ne risulta assicura un elevato grado di pulizia.

Lunghezza 25 mm.



Rimozione di strumenti rotti

Le punte **EN-9**, **EN-10** e **EN-11** sono realizzate in titanio e hanno una punta diamantata. Se applicate con forza, mantengono la piegatura. Le punte in titanio tagliano in modo uniforme e hanno un'eccezionale sensazione tattile. Il diametro ridotto ne consente l'utilizzo nel terzo apicale del canale radicolare. L'utilizzo primario è quello di isolare e rimuovere strumenti rotti. Le vibrazioni spesso possono rimuovere uno strumento rotto perfino nel terzo apicale del canale. Utilizzo nel terzo medio e apicale con illuminazione e ingrandimento.

**EN-9
LM 100209**

Lunghezza 20 mm.

**EN-10
LM 100210**

Lunghezza 24 mm.

**EN-11
LM 100211**

Lunghezza 27 mm.



Attenzione! Tutte le punte endodontiche sono estremamente sensibili e, se non usate correttamente o con potenza eccessiva, sono soggette a rottura. Non superare la modalità di lavoro raccomandata e posizionare sempre la punta sulla superficie del dente prima di attivare la potenza.

Supporti per strumenti e lime

FH-1, **FH-2** e **FH-3** sono supporti per lime manuali. Utilizzando uno strumento manuale nel canale riempito di fluido, le vibrazioni ultrasoniche puliscono il canale molto efficacemente. L'effetto di cavitazione che ne risulta assicura un elevato grado di pulizia.

**FH-1
LM 100401**

Angolazione 70°

**FH-2
LM 100402**

Angolazione 90°

**FH-3
LM 100403.**

Angolazione 110°



Codifica della modalità di lavoro

Max 40 %



Max 70 %



Max 100 %



Supporti per strumenti e lime

IH-1
LM 100404

Supporto per le punte per il mantenimento implantare e per le punte AP-1 e AP-2 per la chirurgia apicale. Può essere utilizzato anche con gli strumenti endodontici e altri strumenti con un diametro di 0,8 mm. Angolazione 125°

Codifica della modalità di lavoro: vedere strumento selezionato


IH-2
LM 100405

Stessa forma e campo di applicazione della IH-1. Angolazione 100°.

Codifica della modalità di lavoro: vedere strumento selezionato



Endodonzia

Chirurgia apicale

Le punte diamantate sono utilizzate per l'apertura e la pulizia della radice durante la chirurgia apicale. Il collo lungo delle punte permette un'ottima visibilità e le vibrazioni ultrasoniche in combinazione con la copertura diamantata conferiscono un grado maggiore di tattilità e precisione rispetto agli strumenti rotanti.

AP-1
LM 100507

Usata insieme al supporto strumenti IH-1, IH-2, IHS-1 o IHS-2. Grazie al supporto strumenti, la AP-1 può essere ruotata esattamente all'angolazione necessaria al trattamento. Disponibile in confezione da 4 pezzi.

Diametro 0,3-0,8 mm. Angolazione 110°.


AP-2
LM 100508


Stesso campo di applicazione della AP-1. Grazie al design più sottile, la AP-2 è maggiormente adatta per le radici piccole. Disponibile in confezione da 4 pezzi.

Diametro 0,5 mm. Angolazione 100°.


AP-3
LM 100501

Può essere utilizzata come punta universale per tutti i denti. I 3 mm più esterni della punta sono diamantati per permettere una rimozione efficace della sostanza dentale.

Diametro 0,5 mm. Angolazione 80°.

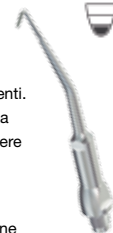
AP-4
LM 100502

Stessa forma e campo di applicazione della AP-3, ma il diametro di 0,7 mm la rende più indicata per le radici più grandi.

Angolazione 80°.


AP-5
LM 100503

Indicata per l'utilizzo sulle radici dei molari nel mascellare destro e nel mandibolare sinistro.

Diametro 0,5 mm. Angolazione 75°.


AP-6
LM 100504

Indicata per l'utilizzo sulle radici dei molari nel mascellare destro e nel mandibolare sinistro.

Diametro 0,5 mm. Angolazione 110°.


AP-7
LM 100505

Indicata per l'utilizzo sulle radici dei molari nel mascellare sinistro e nel mandibolare destro.

Diametro 0,5 mm. Angolazione 75°.


AP-8
LM 100506

Indicata per l'utilizzo sulle radici dei molari nel mascellare destro e nel mandibolare sinistro.

Diametro 0,5 mm. Angolazione 110°.



Attenzione! Tutte le punte per chirurgia apicale sono estremamente sensibili e, se non usate correttamente o con potenza eccessiva, sono soggette a rottura. Non superare la modalità di lavoro raccomandata e posizionare sempre la punta sulla superficie del dente prima di attivare la potenza.

Le punte per chirurgia apicale 3-8 sono disponibili anche nella versione sterile. Vedere pagina 70 per maggiori informazioni!

Chirurgia apicale

Applicazioni speciali

La tecnologia degli ultrasuoni oggi può essere usata non solo per l'ablazione e l'endodonzia. Le punte per ultrasuoni possono essere utilizzate per la rimozione di corone, la condensazione dell'amalgama e per l'applicazione di cemento tissotropico.

SP-34 LM 100734

Usata per la rimozione di corone e intarsi.



SP-34S LM 100734S

Stessa forma e campo di applicazione della SP-34, ma con un diametro inferiore per raggiungere le aree di più difficile accesso.



SP-35 LM 100735

Usata per la condensazione di amalgama.



SP-35A LM 100735A

Usata per l'applicazione di cemento tissotropico insieme a corone e intarsi. L'estremità della punta è ricoperta di plastica in modo da non danneggiare la corona o l'intarsio.



SP-35B LM 100735B

Stessa forma e campo di applicazione della SP-35A, ma con un'angolazione decisamente più aperta.



SP-35C LM 100735C

Stessa forma e campo di applicazione della SP-35B, ma con un'angolazione decisamente più aperta.



Trattamento sterile

Punte per la chirurgia apicale sterile. Il trattamento può essere eseguito con acqua sterile o disinfettanti. Le punte diamantate sono utilizzate per l'apertura e la pulizia della radice. Il collo lungo delle punte permette un'ottima visibilità e le vibrazioni ultrasoniche in combinazione con la copertura diamantata conferiscono un grado maggiore di tattilità e precisione rispetto agli strumenti rotanti.

Per maggiori informazioni su ProPower SteriKit, vedere pagina 64.

APs-3 LM 100803

Punta per il trattamento sterile. Può essere utilizzata con universale per tutti i denti. L'estremità della punta sono diamantate per permettere una rimozione efficace della sostanza dentale. Diametro 0,5 mm. Angolazione 80°.



APs-4 LM 100804

Punta per il trattamento sterile. Stessa forma e campo di applicazione della AP-3, ma il diametro di 0,7 mm la rende più indicata per la radici più grandi. Angolazione 80°.



APs-5 LM 100805

Punta per il trattamento sterile. Indicata per l'utilizzo sulle radici dei molari nel mascellare destro e nel mandibolare sinistro. Diamantatura 3,0 mm. Diametro 0,5 mm. Angolazione 75°.



APs-6 LM 100806

Punta per il trattamento sterile. Indicata per l'utilizzo sulle radici dei molari nel mascellare destro e nel mandibolare sinistro. Diamantatura 3,0 mm. Diametro 0,5 mm. Angolazione 110°.



APs-7 LM 100807

Punta per il trattamento sterile. Indicata per l'utilizzo sulle radici dei molari nel mascellare sinistro e nel mandibolare destro. Diamantatura 3,0 mm. Diametro 0,5 mm. Angolazione 75°.



APs-8 LM 100808

Punta per il trattamento sterile. Indicata per l'utilizzo sulle radici dei molari nel mascellare destro e nel mandibolare sinistro. Diamantatura 3,0 mm. Diametro 0,5 mm. Angolazione 110°.



IHs-1 LM 100801

Vedere strumento selezionato. Supporto sterile per le punte AP-1 e AP-2 per la chirurgia apicale. Può essere utilizzato anche con gli strumenti endodontici e altri strumenti con un diametro di 0,8 mm. Angolazione 125°.



IHs-2 LM 100802

Vedere strumento selezionato. Stessa forma e campo di applicazione della IH-1. Angolazione 100°.



Kit di strumenti

LM-PerioSet 1
LM 6652 Si / XSi

LM-Servo 5
Miniscaler
Curette McCall 17-18
Gracey 1/2
Gracey 11/12
Gracey 13/14

**LM-PerioSet 2**
LM 6682 Si / XSi

LM-Servo 8
Miniscaler
Curette McCall 17-18
Gracey 1/2
Gracey 9/10
Gracey 11/12
Gracey 13/14
Mini Gracey 15/16
Mini Gracey 17/18

**LM-DiagnoSet**
LM 6651 Si / XSi

LM-Servo 5
Impugnatura con specchietto
Sonda LM 5-8
Sonda parodontale WHO
Escavatore rotondo 1,5 mm
Pinzetta

**LM-CompoSet**
LM 6657 Si / XSi

LM-Servo 5
Minispatola
Strumento per anteriori
Otturatore modellante
Otturatore-Modellatore IO
Scaler rimozione materiale
in eccesso, mini

**Dr. Seeberger:**
LM-EstheticSet
LM 6810 XSi

LM-Servo 5
Impugnatura con
specchietto
Trimmex Mesial 1
Trimmex Distal 1
CMF Shaper
Modellatore - BrushHolder

Disponibile solo con manico
LM-ErgoMax (XSi).

**LM-Fancy5**
LM 6820 XSi

Gli strumenti LM più apprezzati
nei colori pastello.

LM-Servo 5
Impugnatura ErgoSingle
con specchietto
Sonda - sonda parodontale
23-52B
Microscaler
Gracey 11/12
Gracey 13/14

Disponibile solo con manico
LM-ErgoMax (XSi).



Kit di strumenti

LM-IntroKit LM 6600



State organizzando un nuovo studio e rinnovando i vostri strumenti? LM-IntroKit è un conveniente kit introduttivo, composto da cinque set di strumenti basilari. IntroKit contiene due set diagnostici, un set endodontico, uno di preparazione e uno parodontale.

Set diagnostico

LM-Servo 5
Specchietto e manico (grigio)
Pinzetta
Sonda - Sonda parodontale
LM 8-550B
Miniscaler



Set di preparazione

LM-Servo 8
2 x specchietto e manico
(azzurro)
Pinzetta
Sonda LM 5-8
Escavatore rotonda 1,5 mm
Strumento per posteriori
LM 48-702
Carver Nystrom III
Brunitore LM 31-32



Set endodontico

LM-Servo 8
Pinzetta
2 x specchietto e
manico (rosso)
Sonda LM 5-8
Escavatore rotondo
1,5 mm
Carver Nystrom III



Set parodontale

LM-Servo 8
Specchietto e
manico (grigio)
Pinzetta
Sonda LM 5-8
Miniscaler
Gracey 1/2
Gracey 7/8
Gracey 11/12
Gracey 13/14



Gli strumenti di LM-IntroKit sono dotati di manico LM-ErgoMax

Ingegnoso Sistema LM-MultiHolder

Due strumenti MultiHolder e diversi tipi di punte lavoranti in plastica intercambiabili - uno strumento veramente multifunzionale!

- la gamma di angolazioni permette un facile accesso anche per le aree più difficili
- ottimale combinazione di acciaio e plastica - il gambo in acciaio è rigido e, quando necessario, la punta lavorante si può flettere

LM-MultiHolder PK I
LM 750-756




LM-MultiHolder PK II
LM 752-754



LM-MultiLever
LM 7550

Per rimuovere gli inserti in plastica monouso, vi suggeriamo LM-MultiLever.

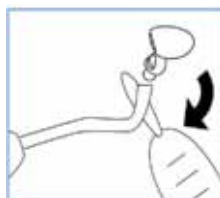

Punte lavoranti per il Sistema LM-MultiHolder

Contact formers

Punte trasparenti per la realizzazione di contatti interprossimali correttamente formati e precisi.

- adatte all'utilizzo con tutti i tipi di matrice
- non aderiscono ai materiali compositi

Quattro misure differenti, ca. 60 pz / confezione

LM 7622 XS
LM 7624 S
LM 7626 M
LM 7628 L

LM 7620 Confezione assortita, ca. 120 pz (30 pz per misura)



Retrattori gengivali

Per instaurare le condizioni ottimali di lavoro nelle procedure a livello gengivale.

Tre dimensioni, ca. 60 pz / confezione

LM 7502 S per gli incisivi
LM 7504 M per i premolari
LM 7506 XL per i molari

LM 7500 Confezione assortita, ca. 90 pz (30 pz / dimensione)



Sistema LM-MultiHolder, Manico chirurgico

Matrici cervicali

Per un'otturazione anatomicamente corretta a livello gengivale.

- protegge dall'umidità
- previene le bolle d'aria

Quattro modelli di dimensione e forma differenti, ca. 60 pz / confezione

LM 7602 Per incisivi

LM 7604 Per canini e premolari

LM 7606 Per molari di piccole dimensioni

LM 7608 Per molari di grandi dimensioni

LM 7600 Confezione assortita, ca. 120 pz (30 pz / modello)



LM-MultiHolder IntroKit LM 7555K

Il kit introduttivo contiene gli strumenti LM-MultiHolder PK I e PK II (XSi), un MultiLever e campioni di tutte le punte lavoranti disponibili. In totale vi sono 44 punte lavoranti, 4 per ciascuna misura e tipo.

È possibile ordinare un campione del kit introduttivo LM-MultiHolder anche separatamente. LM 7555

LM-CompoKnife

LM-CompoKnife LM 9006

Uno strumento di rimozione multifunzionale per le diverse esigenze odontoiatriche

- preciso, forte e affilato
- manico rotondo in silicone
- buona sensibilità in mano
- la lama può essere facilmente utilizzata sulle diverse superfici del dente
- la lama è inserita profondamente, con il gambo che impedisce alla lama di danneggiare i tessuti molli e permette l'utilizzo di una forza di trazione e laterale quando si asporta il materiale in eccesso



CompoKnife è ideale per la rifinitura nell'area prossimale.



Ideale per la rifinitura delle mascherine utilizzate nei trattamenti sbiancanti.



Strumento ideale per la rimozione degli strati sottili di resina adesiva.

LM-ErgoHold 3

LM-ErgoHold 3 LM 9003

Nuovo tipo di manico chirurgico

- presa perfetta
- controllo accurato della lama
- movimenti rotatori controllati
- ottima sensibilità nel controllo della posizione della lama
- movimento controllato nei tessuti
- lama con fissaggio nr. 3
- rivestimento elastico al silicone



LM-MultiSeptor

Aspirasaliva efficiente e facile da usare

LM-MultiSeptor mantiene asciutta l'area da trattare, un quadrante alla volta. Funziona perfettamente sia nell'area mandibolare sia in quella mascellare.

- può essere facilmente modellato nella forma desiderata
- confortevole per il paziente
- lascia ampio spazio alle procedure cliniche
- aiuto indispensabile quando si lavora senza assistente

MultiSeptor viene usato durante interventi di conservativa, endodonzia, ortodonzia e preparazioni di corone e ponti.

MultiSeptor può essere collegato agli aspiratori più comuni presenti sul mercato.

Manutenzione: disinfezione, lavaggio, smontaggio del pezzo intermedio, pulizia, sterilizzazione. Il pezzo intermedio deve essere sterilizzato a freddo.

LM-MultiSeptor, 40 cm, LM 2020

LM-MultiSeptor, 50 cm, LM 2020A

Pezzi di ricambio

Tubi di ricambio = 5 tubi (40 cm) + molla LM 2021

Tubi di ricambio = 5 tubi (50 cm) + molla LM 2021A



Punte di applicazione

Le punte di applicazione sono monouso!

- utili per applicare liquidi di trattamento su tutte le superfici del dente o in cavità
- eccellenti per applicare sottofondi, adesivi, primer e mordenzanti

Punta di applicazione, 50 pezzi

LM 758Y gialla

LM 758B blu

LM 758R rossa



Usare le Punte di applicazione insieme al LM-BrushHolder (LM 481-758). Vedere pagina 40 per ulteriori informazioni sul BrushHolder.

Sistema di vassoi

nuovo

LM-ServoMax - Flusso di lavoro ottimale e manutenzione razionale

Il nuovo sistema di vassoi LM-ServoMax organizza e razionalizza la gestione degli strumenti e degli accessori durante gli interventi e la sterilizzazione. Consente un buon controllo delle infezioni e permette di risparmiare tempo riducendo la manipolazione dei singoli elementi. Prolunga inoltre la durata degli strumenti e protegge il personale. I suoi moduli versatili permettono di mantenere tutti gli strumenti e gli accessori organizzati in un singolo vassoio. Il sistema è adattabile alle esigenze specifiche e individuali del trattamento.




Procedure razionalizzate con minima manipolazione



Dopo il trattamento, i moduli vengono chiusi e i rifiuti vengono scartati.



Il vassoio completo viene sottoposto alla disinfezione e pulizia.

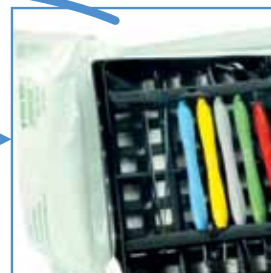

Dopo la sterilizzazione viene conservato fino al trattamento successivo.

Moduli LM-ServoMax

nuovo

Set di vassoi LM-ServoMax

LM 6410

comprende 1 set di fascette universali e 2 clip in metallo

- dimensioni: 288 x 185 x 29 mm

Fascette universali LM-ServoMax,

2 pezzi

LM 6416

Clip in metallo LM ServoMax, 2 pezzi

LM 6415



Accessori

Scatola standard LM-ServoMax

LM 6420

Scatola conservativa/endodonzia LM-ServoMax

LM 6430

Supporto in gomma LM-ServoMax, 20 pezzi

LM 6435

- per pulire i lime endodontici

Scatola punte ultrasoniche LM-ServoMax

LM 6460

- per sei punte ultrasoniche



Cassette, Bottoni di identificazione, Disinfettante per strumenti

Scatola fresa / lime LM-ServoMax LM 6450

- per otto frese e quattordici lime endodontiche
- Include scale di regolazione e misura per lime



Supporto coppette LM-ServoMax LM 6490



Cassette per strumenti

Nelle cassette LM-Servo gli strumenti vengono bloccati in modo sicuro, ma possono ruotare liberamente per una pulizia ottimale e per garantire il controllo delle infezioni. Le cassette possono essere identificate con bottoni di silicone colorati e agganciate al vassoio LM-ServoMax con clip in metallo (LM 6415).

LM-Servo 5 LM 6650

- cassetta per cinque strumenti manuali
- dimensioni: 180 x 86 x 28 mm



Pat

LM-Servo 8 LM 6680

- cassetta per otto strumenti manuali
- dimensioni: 180 x 136 x 28 mm



Pat

La cassetta per strumenti di estrazione LM è compatibile con il vassoio LM-ServoMax, vedi pagina 54.



Tutti i moduli hanno un design universale di dimensioni standard e non sono specifici del marchio. Sono realizzati in un materiale plastico speciale di eccezionale durata, che tollera i metodi più comuni di pulizia e di sterilizzazione e diversi tipi di agenti chimici (max 134 °C / 273 °F). I moduli vengono venduti vuoti.

Bottoni di identificazione

Prodotti di identificazione

Su entrambi i fi anchi delle cassette si trovano delle predisposizioni rispettivamente per tre bottoni di identificazione

- i bottoni vengono forniti separatamente
- confezione 20 pz./colore



Anelli colorati di identificazione

- confezione 50 pz./colore

LM 5000 blu
LM 5001 verde
LM 5002 arancione
LM 5003 rosso
LM 5004 giallo

LM 5005 nero
LM 5006 bianco
LM 5007 marrone
LM 5008 lilla



Affilastrumenti

Affilastrumenti LM-RondoPlus

Durante il trattamento dei tessuti duri, le lame degli strumenti di trattamento perdono la loro affilatura e quindi si riducono nettamente le loro caratteristiche di efficienza e rendimento. Gli strumenti dovrebbero essere affilati dopo l'uso.

Facile e veloce

- metodo semplice - la lama viene tenuta nella corretta posizione di affilatura, mentre la pietra affilante ruota
- l'affilatura di uno strumento avviene in pochi secondi

Versatile

- sia per strumenti di preparazione sia per quelli per parodontologia
- per destrorsi e mancini
- è possibile selezionare la direzione di rotazione

Accurato e sicuro

- due posizioni di appoggio per lo strumento. La posizione superiore è per gli strumenti di preparazione e quella inferiore per gli strumenti per parodontologia
- viene mantenuta la forma originale della lama
- bassa velocità di rotazione - la lama non si surriscalda né si influisce sulla tempra


La mola a grana fine è del tipo a 400 grit. Sono disponibili come ricambio le mole per affilatura a grana più fine e grana più ruvida.

Su entrambi i lati dell'affilastrumenti si trovano dei supporti smontabili per il test di affilatura, gli LM-Fingo. Fingo è prodotto in plastica acrilica e si adatta a tutte le dimensioni delle lame.



BREVETTATO

Con istruzioni semplici e chiare, chiunque può imparare ad affilare! La confezione include un CD di istruzioni e una guida rapida tascabile!

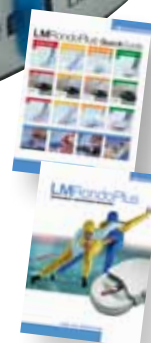

LM-RondoPlus LM 8600

Il kit include: dispositivo di affilatura, comando a pedale, mola 400 grit, 2 LM-Fingo, 5 nastri abrasivi, CD di istruzioni e guida rapida.

Pezzi di ricambio

Mola

600 grit (bianco)	LM 8660
400 grit, più ruvida (grigio)	LM 8640
320 grit, la più ruvida (nero)	LM 8632

Pedale LM 8630

Nastri abrasivi, (5) LM 8550

LM-Fingo, 2 pz LM 8602

LM-Fingo, 6 pz LM 8606



LM-ProColor instrument disinfectant

Protezione efficace

LM-Procolor è un nuovo disinfettante per strumenti manuali, privo di aldeide, che combina un ampio spettro d'azione, elevato potere pulente e una composizione che protegge i diversi materiali. LM-ProColor è adatto anche per l'impiego nell'apparecchio a ultrasuoni.

Sicuro ed economico

LM-Procolor è un concentrato economico il cui piacevole aroma e colore risultano gradevoli all'operatore. Una bottiglia da due litri produce 100 litri di soluzione pulente.

Composizione: 100 g di LM-ProColor contengono: 9 g di alchil-benzildimetil-ammonio cloruro, 0,1 g di composto di guanidina, detergenti non ionici, componenti detergenti alcalini, inibitori di corrosione, solventi in soluzione acquosa.

Spettro d'azione: Battericida incl. bacillo Tb, fungicida, virucida (virus con involucro, virus epatite B¹⁾, virus epatite C²⁾, HIV³⁾).

LM-ProColor LM 4100

Concentrato da
due litri




1) procedimento al microscopio elettronico

2) analisi del virus succedaneo BVDV

3) L'efficacia contro il virus dell'epatite B è ugualmente efficace contro l'HIV.

Istruzioni per la manutenzione degli strumenti

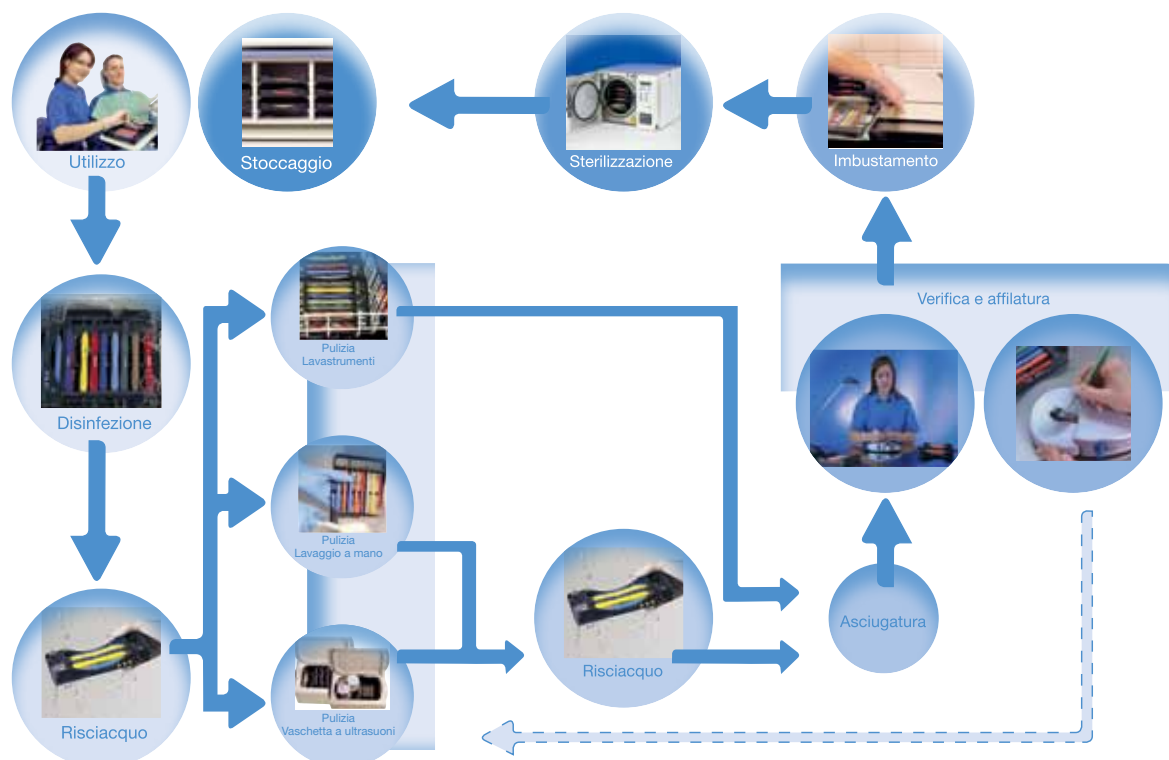**1. Pre-disinfezione**

Non lasciare asciugare gli strumenti contaminati. Mettere gli strumenti in una soluzione disinfettante immediatamente dopo l'uso. Si raccomanda il disinfettante chimico LM-ProColor. Seguire le istruzioni d'uso del disinfettante utilizzato con particolare attenzione al dosaggio e ai tempi di esposizione. Se si utilizza un termodisinfettore, continuare la manutenzione dal punto 6.

2. Risciacquo

Risciacquare completamente gli strumenti sotto acqua corrente tiepida.

3. Opzioni di pulizia

- Lavastrumenti.
- Lavaggio manuale: Rimuovere tutto lo sporco visibile con acqua tiepida. Usare una spazzola con setole morbide e detergente.
- Lavatrice a ultrasuoni: Usare cassette porta strumenti per evitare danni.

4. Risciacquo

Risciacquare completamente gli strumenti sotto acqua corrente tiepida.

5. Asciugatura

Asciugare gli strumenti prima della sterilizzazione.

6. Verifica ed affilatura

Affilare gli strumenti o, se necessario, sostituirli.

7. Imbustamento

Imbustare gli strumenti affilati e puliti per la sterilizzazione.

8. Opzioni di sterilizzazione

Autoclave: porre gli strumenti puliti, asciugati e adeguatamente imbustati dentro all'autoclave. Sterilizzazione con aria calda: porre gli strumenti puliti, asciugati e adeguatamente imbustati dentro alla sterilizzatrice ad aria calda; non posizionarli troppo vicini; assicurarsi della corretta temperatura (max. 180° C/355 F).

Importante!

- Effettuare regolarmente la manutenzione delle macchine
- Seguire le istruzioni d'uso
- Prestare particolare attenzione al dosaggio corretto e all'esposizione

A

Apex Packer GFV 0.4 - 0.6 mm.....	50
Apex Packer GFV 0.8 - 1.0 mm.....	50
Apexcavator GFV 0.8 - 1.0 mm.....	49
Apexcavator GFV 0.8 mm.....	49
Apexcavator GFV 1.0 mm.....	49
Applicatore di sottofondo – Otturatore, rigido.....	37
Applicatore di sottofondo, pieghevole – Condensatore.....	37
Applicatore di sottofondo, rigido.....	37
Applicatore per legature in plastica.....	60
Applicatore profilo retrattore, 2.0 mm.....	35
Applicatore profilo retrattore, 2.6 mm.....	35
Arch Wire Tucker.....	52

B

Brunitore.....	38
Brunitore – Otturatore rotondo, 1.5 - 2.5 mm.....	38
Brunitore 21.....	38
Brunitore 27-29.....	38

C

Carver universale, occlusale-prossimale.....	42
Cleioide-Discoide.....	42
CMF Shaper.....	39
Columbia 13-14.....	22
Columbia 2L-2R.....	22
Columbia 4L-4R.....	22
Contact formers.....	73
Crane-Kaplan.....	19
Crown Off.....	43
Crown On I.....	43
Crown On II.....	43
Curette di Gracey mesio-distale.....	30
Curette di Gracey mesio-distale macro.....	29
Curette di Gracey rigid.....	30
Curette interprossimale SV 1-3.....	24
Curette interprossimale SV 2-4.....	24
Curette LM 15-16.....	20
Curette universali.....	20

D

Dr. Seeberger.....	71
--------------------	----

E

ErgoAccess.....	25
ErgoMix con punte in super acciaio DuraGradeMax ..	31
ErgoMix con punte in titanio per impianti.....	32
Escavatore a cucchiaio, 1,0 mm.....	34
Escavatore a cucchiaio, 1,5 mm.....	34
Escavatore canale radicolare, 1,0 mm.....	48
Escavatore canale radicolare, 1,5 mm.....	48
Escavatore canale radicolare, 2,0 mm.....	48
Escavatore triple-angled rotondo, 1,0 mm.....	35
Escavatore triple-angled rotondo, 1,5 mm.....	35
Escavatore triple-angled rotondo, 2,0 mm.....	35
Escavatore triple-angled rotondo, 3,5 mm.....	35
Escavatore, rotondo, 1,0 mm.....	34
Escavatore, rotondo, 1,5 mm.....	34
Escavatore, rotondo, 2,0 mm.....	35

F

Furcator KS.....	24
------------------	----

G

Goldman-Fox 3.....	22
Goldman-Fox 4.....	22
Gracey 1/2.....	27
Gracey 11/12.....	27
Gracey 11/14.....	30
Gracey 12/13.....	30
Gracey 13/14.....	28
Gracey 15/16.....	28
Gracey 15/18.....	30
Gracey 16/17.....	30
Gracey 17/18.....	29
Gracey 3/4.....	27
Gracey 5/6.....	27
Gracey 7/8.....	27
Gracey 9/10.....	27
Gracey P3-P4.....	27

H

H-Scaler I.....	25
H-Scaler II.....	25
Hedstroems.....	46
1/2 Hollenback.....	41

K

K-Files.....	46
--------------	----

L

Langer 1/2.....	21
Langer 3/4.....	21
Langer 5/6.....	21
Legatura On-Off SL.....	60
LiftOut.....	53
Lima per biforcazione File SV 7-8.....	24
Lima per concavità File SV 5-6.....	24

M

Macro Gracey 11/12.....	28
Macro Gracey 11/14.....	29
Macro Gracey 12/13.....	29
Macro Gracey 13/14.....	29
Macro Gracey 5/6.....	28
Macro Gracey 7/8.....	28
Maehlum.....	42
Manico per specchietto.....	12
Manico specchietto, per ortodonzia.....	60
Margin trimmer 1.2 mm, distale.....	36
Margin trimmer 1.2 mm, mesiale.....	36
Markley 2.....	38
Matrici cervicali.....	74
McCall 11A-12A.....	19
McCall 13S-14S.....	20
McCall 17-18.....	20
McCall 17S-18S.....	21
Micro Otturatore 0.8 mm.....	37
Microscaler EASi.....	25
Microscaler LM204SD.....	18
Mini Gracey 1/2.....	29
Mini Gracey 11/12.....	29
Mini Gracey 13/14.....	29
Mini Gracey 15/16.....	29
Mini Gracey 17/18.....	29

Mini Gracey 7/8	29
Mini Kaplan.....	19
Mini Langer 1/2	21
Mini Langer 3/4	22
Mini Langer 5/6	22
Mini McCall 13S-14S.....	20
Miniscaler	18
Miniscaler di rimozione del materiale in eccesso	42
Minispatola	41
Modellatore – Porta pennello	40

N

NiTi Files	46
Nyström I	41
Nyström III	41

O

Otturatore endodontico, 0.5 - 1.0 mm	49
Otturatore modellante, 1.5-2.5 mm	41
Otturatore-Modellatore IO	40
Otturatore-Modellatore IO m	40
Otturatore-Modellatore IO p	40
Otturatore, 1.8 - 1.5 mm	37
Otturatore, cilindrico, 0.8 - 1.2 mm	37
Otturatore, cilindrico, 1.0 - 1.5 mm	37
Otturatore, cilindrico, 1.2 - 2.0 mm	38
Otturatore, cilindrico, 1.8-2.5 mm	38
Otturatore, triple-angled, 1.2 - 2.0 mm	38

P

Periodontic Set.....	72
Pezzi di ricambio	75
Portastrisce LM-Cello.....	44
Pressalegatura.....	60
Pressalegatura - Scaler U15.....	60
ProPower AirLED.....	63
ProPower CombILED	64
ProPower SteriLED.....	64
ProPower UltraLED	63
Punta di applicazione, blu	75
Punta di applicazione, gialla.....	75
Punta di applicazione, rossa	75
Push Scaler H4-H5.....	19

R

Reamer	46
Retrattori gengivali	73

S

Scaler a falcetto.....	19
Scaler di rimozione materiale in eccesso	42
Scaler H6-H7.....	19
Scaler Hoe anteriore.....	23
Scaler Hoe laterale	23
Scaler Hoe posteriore.....	23
Scaler LM204S.....	18
Scaler LM23	18
Scaler U15 Towner	19
ServoMax	76
Set di preparazione	72
Set diagnostico	72
Set endodontico	72
Sonda	12
Sonda – Sonda parodontale.....	14
Sonda – Sonda parodontale WHO	15
Sonda canale radicolare.....	48
Sonda Holst.....	14
Sonda Nabers	16
Sonda parodontale North Carolina.....	15
Sonda parodontale WHO	15
Sonda parodontale Williams.....	15
Sonda per protesi	14
Sonda, centrato.....	13
Sonde per biforcazioni	16
Spatola	36
Spatola per compositi	41
Strumenti di modellatura	40
Strumento di rimozione delle otturazioni.....	42
Strumento Flow IO	40
Strumento per gli anteriori.....	41
Strumento per i posteriori.....	41
Syntette	23
Syntette, Mini	23

T

Trimmex Distal 1 1.0 mm.....	39
Trimmex Distal 2 1.5 mm.....	39
Trimmex Mesial 1 1.0 mm	39
Trimmex Mesial 2 1.5 mm	39
TwistOut.....	52

Termini di Garanzia

Le seguenti condizioni di garanzia si applicano alla vendita dei prodotti di LM-Instrument Oy (di seguito "Prodotti") ad una società acquirente o a privati da parte di LM-Instruments Oy (di seguito: "Fabbricante").

Il Fabbricante garantisce che i Prodotti sono esenti da difetti derivanti da materiali difettosi o dalla lavorazione per un periodo di ventiquattro (24) mesi dalla data di acquisto da parte del cliente, del rivenditore autorizzato dal Fabbricante (in seguito "Rivenditore Autorizzato"). Il periodo di garanzia è eccezionalmente di tre (3) mesi per prodotti il cui ciclo di utilizzo è inferiore ai 24 mesi a causa della normale usura a cui sono sottoposti, per esempio punte per strumenti manuali, punte per scaler ad ultrasuoni, punte per endofile, specchietti per superfici frontali e mole per dispositivi di affilatura.

La presente garanzia non si applica ai prodotti o alle loro parti:

- a) che sono state oggetto di uso scorretto, improprio, negligenza o incidente o non sono stati collegati alla corretta alimentazione;
- b) che hanno subito alterazioni, modifiche o aggiunte senza il consenso scritto del Fabbricante;
- c) che sono stati installati o utilizzati inadempendo alle istruzioni di installazione, uso e manutenzione;
- d) che hanno subito una normale usura per l'utilizzo, ad esempio le punte di lavoro di LM-MultiHolder, i nastri di LM-Cello, la soluzione disinfettante LM-Procolor.

La garanzia copre solo ed esclusivamente Prodotti difettosi o parti difettose di Prodotto che vengono inviati EXW al Fabbricante per la riparazione o sostituzione.

L'azienda produttrice richiede che un reclamo scritto relativo al difetto stesso gli venga inviato unitamente al prodotto difettoso, attraverso il Rivenditore Autorizzato.

Una perizia del Prodotto o parte del Prodotto ritenuto difettoso, sarà eseguita dal Fabbricante che stabilirà l'esistenza o meno del difetto.

Il cliente deve contattare il Rivenditore Autorizzato da cui ha acquistato i prodotti per richiedere la riparazione o la sostituzione in garanzia, presentare una richiesta scritta e inviare il prodotto originale al Rivenditore Autorizzato.

La presente garanzia è nulla se la riparazione o la manutenzione vengono eseguite da personale non autorizzato dal fabbricante.

Qualsiasi prodotto non fabbricato dal Fabbricante dispone solo della garanzia, se del caso, offerta da chi lo ha prodotto.

La presente garanzia è l'unica offerta dal Fabbricante, che declina ogni altra responsabilità riguardo alla commerciabilità dei prodotti, idoneità per scopi specifici, garanzie e responsabilità, espressa o implicita, derivante dalla legge o di altro genere. Il Fabbricante non sarà in alcun caso responsabile per qualsivoglia danno generale, consequenziale o incidentale, perdita di utilizzo o perdita di profitti a causa della negligenza del Fabbricante o relativamente alla vendita, consegna, installazione, riparazione o uso dei Prodotti.

Il Fabbricante declina ogni responsabilità nei confronti del Rivenditore Autorizzato o del cliente o di qualsiasi altra persona per lesioni, perdita o danni di qualsiasi genere o natura, o eventuali danni riscontrati o rivendicati, o qualsiasi altra responsabilità derivante o attribuita dalla manipolazione, uso, funzionamento, manutenzione o riparazione di Prodotti da parte di persone diverse dal Fabbricante. La presente esclusione di responsabilità non si applica in conformità con la normativa sulla responsabilità dei prodotti in caso di lesioni personali e danni alle proprietà di oggetti di uso privato derivanti dai Prodotti.

LM-Instruments Oy

PL 88 (Norrbyn rantatie 8)

FI-21601 Parainen

Finlandia

Tel. +358 2 4546 400

Fax +358 2 4546 444

info@lminstruments.com

www.lminstruments.com

Contattate il vostro distributore!
